


Popis částí

- 1. Po instalaci kartáčkové hlavy bude mezi spodní částí kartáčkové hlavy a horní částí rukojeti mezera 0,5 mm až 1 mm, aby byly zajištěny normální vibrace kartáčové hlavy.
 - 2. Aktivace: Stisknutím a podržením hlavního tlačítka po dobu 2 sekund se poprvé aktivujete.
 - 3. Přepínač režimů: Do 4 sekund od vibrací zubního kartáčku krátce stiskněte hlavní tlačítka pro přepnutí režimů.
 - 4. Pauza: Poté, co zubní kartáček běžel po dobu 4 sekund v libovolném režimu, stisknutím hlavního tlačítka čištění pozastavíte.
 - 5. Vypnutí obrazovky: Po čištění zubů se obrazovka automaticky vypne po 10 sekundách nečinnosti.
- Rozměry: 26,8 mm × 27,8 mm × 251,5 mm (včetně hlavy kartáčku)

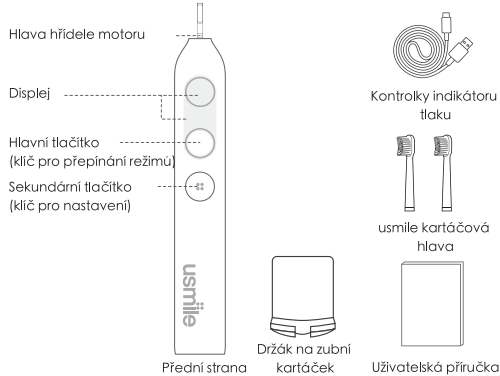

Bezpečnostní opatření

Abyste předešli nebezpečí, jako jsou poruchy, úrazy elektrickým proudem, zranění osob, požár a poškození zařízení nebo majetku, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

1. Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a lidé se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo poučením o bezpečném používání zařízení a rozumí nebezpečím, která s ním souvisejí. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržba uživatelem by neměly provádět děti bez dozoru.

2. Tento produkt musí být dodáván pouze s extra nízkým bezpečným napětím odpovídajícím označení na tomto produktu.

3. Nevystavujte zařízení nebo baterii nadměrným teplotám; Uvědomte si riziko, že svorky zařízení nebo baterie ovládané baterií zkrátí kovové předměty.

4. Toto zařízení obsahuje baterie, které lze vyměnit pouze kvalifikovaným personálem.

5. Nerozebírejte tento produkt bez vědomí; Před vyjmutím baterie odpojte napájení; Vyčerpajte baterii před demontáží; Při demontáži plastového pouzdra použijte vhodné nástroje, abyste zabránili poškození baterie nebo způsobili krátký obvod -; Po vyjmutí, vyjměte drát(s) z baterie a umístěte baterii do ekologického kontejneru pro bezpečné zpracování.

6. Tento produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nedávejte sluneční světlo na oheň, nevystavujte vysoké teplotě nebo netlačte ve vlhké oblasti. To může vést k úniku baterie, přehřátí a / nebo explozi; Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel a vypněte napájení.

7. Tento produkt neupravujte, neopravujte ani nerozebírejte sami. Nepoužívejte tento produkt během vany, sprchy nebo sauny. Při nabíjení udržujte nabíjecí kabel a nabíjecí rozhraní zařízení v suchu a čistotě. Nesnažte se odstranit skvrny nebo nečistoty, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost procesu nakládky.

8. Pokud máte závažnou periodontitidu, podstupujete zubní ošetření nebo máte orální nepohodlí, poraďte se se svým zubařem před použitím tohoto přípravku. Lidé, kteří používají ortodontii, kteří podstoupili zubní ošetření nebo zubní implantáty, by měli poslouchat zubaře.

9. Když začnete tento produkt používat, může se při zvyknutí na proces čištění objevit mírné krvácení. Měl by to vyřešit za jeden až dva týdny. Krvácení, které přetrvává déle než dva týdny, může naznačovat abnormality dásní. V takovém případě přestaňte produkt používat a poraďte se se svým zubařem.
10. Před použitím tohoto produktu zkontrolujte známky poškození. Pokud je rozbitý, prasklý, rezavý atd., přestaňte jej používat okamžitě. Pokud je zástrčka nebo napájecí kabel poškozen, vyměňte je před použitím -.
11. Tento produkt je určen k čištění úst. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu. Pokud během používání dojde k nepohodlí nebo bolesti, přestaňte okamžitě používat a poraďte se se svým zubařem.
12. Tento produkt splňuje bezpečnostní normy pro elektromagnetická zařízení. Máte-li dotazy týkající se kardiostimulátorů nebo jiných implantovaných zařízení, poraďte se s lékařem nebo výrobcem zařízení před použitím.
13. Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a dětí. Tento produkt má malé části, například "Kryt hlavy kartáček", které by se neměly spolknout. Při použití nového produktu nebo výměně hlavy kartáče zlikvidujte kryt hlavy.
14. Používejte napájení s výkonem nepřesahujícím 15 W za normálních nebo neobvyklých pracovních podmínek.


Elektromagnetická pole (EMF)
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Toto zařízení splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí. Jeho používání je bezpečné, pokud se s ním zachází správně podle pokynů uvedených v této příručce. Pokud máte kardiální nebo jiné implantované zařízení, poraďte se před použitím s lékařem a výrobcem zařízení.

Postup čištění



Prosim vyčistěte si správně své zuby. Při čištění vnější a vnitřní strany doporučuje udržovat mezi štetinami a povrchem zubů úhel 45°, aby bylo čištění účinnější.

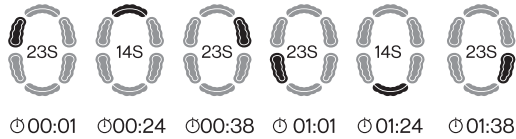

Doporučení: Rozdělte povrch zubu na 6 oblastí a čistěte v pořadí, jak je uvedeno na obrazovce.


- Výběr jazyka: Východním jazykem je angličtina. Krátkým stisknutím hlavního tlačítka můžete přepínat mezi třemi systémovými jazyky (angličtina, španělština, zjednodušená čínština). Po výběru požadovaného jazyka potvrďte stisknutím a podržením hlavního tlačítka. Zobrazí se ikona "✓", která indikuje úspěšné nastavení.
- Vlastní inteligentní režim: Krátkým stisknutím hlavního tlačítka přepnete intenzitu, dlouhým stisknutím hlavního tlačítka vyberete intenzitu a objeví se ikona "✓", která indikuje úspěšné přizpůsobení.
- Začněte používat: Po dokončení průvodce spuštěním spustíte čištění krátkým stisknutím hlavního tlačítka.
- Pozastavit čištění: Poté, co zubní kartáček běží po dobu 4 sekund v libovolném režimu, stisknutím hlavního tlačítka čištění pozastavíte.
- Přepínejte režimy: Poté, co zubní kartáček zavibruje, krátkým stisknutím hlavního tlačítka do 4 sekund přepnete mezi inteligentním režimem, režimem prevence kazů sladkých potravin, režimem odstraňování skvrn od kávy, ranním a večerním režimem duálního účinku a režimem citlivosti dásní.
- Oznámení o stavu čištění: Po čištění se na obrazovce zobrazí stav čištění jako reference.
- Vypnutí: Když zubní kartáček po čištění detekuje asi 10 sekund nečinnosti, obrazovka se automaticky vypne.

Popisy režimů čištění zubů:

- Inteligentní režim: Inteligentní čištění, které se přizpůsobí ústní dutině a poskytuje vědeckou metodu čištění
- Režim prevence zubního kazu sladkých potravin: Intenzivnější čištění oblastí náchylných k zubnímu kazu, vhodné pro lidi, kteří často jedí sladkosti
- Režim odstraňování skvrn od kávy: Inteligentní identifikace oblastí, kde se snadno hromadí pigment, pro výkonné čištění
- Ranní a večerní režim s duálním efektem: Ranní režim se zaměřuje na efektivní čištění, aby se ušetřil čas čištění; Večerní režim zajišťuje hloubkové čištění, které eliminuje bakterie v ústní dutině během dne
- Režim citlivosti dásní: Jemné čištění pro snížení podráždění citlivých dásní

Stav baterie a nabíjení

Tento výrobek byl před dodáním nabit, takže jej můžete používat přímo po obdržení. Pokud se zobrazí ikona výzvy k nabíjení, což znamená, že je baterie příliš slabá, nabíjeje ji včas a doba nabíjení potřebuje přibližně 4 ~ 5 hodin.

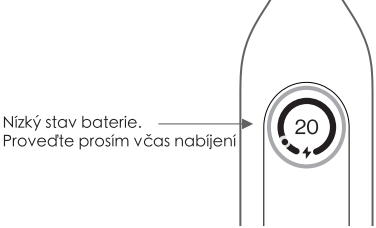

Šetrné na životní prostředí

Elektrický zubní kartáček usmile má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii. Při likvidaci jej nemíchejte s běžným domovním odpadem. Dodržujte prosím zákony a předpisy o třídění odpadu týkající se elektronických výrobků a dobíjecích baterií ve vaší zemi nebo regionu. Použité baterie by měly být recyklovány. Upozornění: Při vyjímání baterie se ujistěte, že je baterie zcela vybitá.

Informace o produktu:

Název produktu: Chytrý elektrický zubní kartáček Y20 PRO
Značka: usmile
Model výrobku: Y20 PROS
Jmenovitý příkon: 5W
Vodotěsný a prachotěsný: IP68
Jmenovitý příkon: 5V= 1A
Specifikace baterie: 2500mAh
Výrobce: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.
Kontakt na zákaznický servis: service@usmile.com
Vyrobeno v Číně

Poruchy a způsoby odstranění

Poruchy	Možné důvody	Odstranění
Nejde zapnout po stisknutí tlačítka ZAP/VYP.	Výrobek je ve stavu ochrany při nabíjení.	Přestaňte ho nabíjet
	Baterie je příliš vybitá.	Připojte napájecí kabel a výrobek nabíje.
Nelze nasadit hlavici kartáčku na hřídelek motoru	V konektoru je cizí předmět.	Pomocí nástroje cizí předměty z konektoru odstraňte.
	Na hřídelece motoru je cizí předmět	Očistěte hřídelek motoru.
	Nejedná se o hlavici kartáčku usmile	Nahraďte ji hlavici kartáčku usmile.
Hlavice kartáčku jen slabě vibruje	Hlavice kartáčku není správně nasazena.	Opětovně nasadte hlavici kartáčku.
	Mezi hlavici kartáčku a rukojeti je cizí předmět.	Sejměte hlavici kartáčku a cizí předměty odstraňte.
Kontrolka baterie během nabíjení nesvítí.	Napájení není normální.	Správně připojte síťové napětí.
Doba fungování po nabití příliš krátká.	Teplota prostředí je příliš nízká.	Výrobek nabíjejte a používajte při vnitřní teplotě 15° C-35° C.
	Doba nabíjení je příliš krátká	Nabíjejte výrobek.
Výrobek nelze zapnout.	Baterie je vybitá.	Nabíjejte výrobek.

FC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.