



Minuteur

Utilisez le bouton de la minuterie pour définir une limite de massage de 10, 15 ou 20 minutes. L'unité s'éteindra automatiquement à la fin du cycle de massage sélectionné.



10 Min



15 Min



20 Min

NOTA: Le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® offre une durée de fonctionnement de 20 minutes et s'arrête automatiquement après chaque séance.




Jusqu'à 20 minutes par séance


Connexion à l'application truMedic®

Après avoir téléchargé l'application truMedic®, suivez les étapes suivantes pour connecter votre appareil:


1 Créez un compte

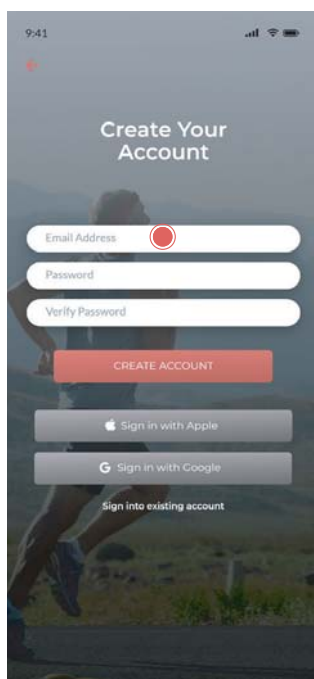

2 Sélectionnez "Télécommande"

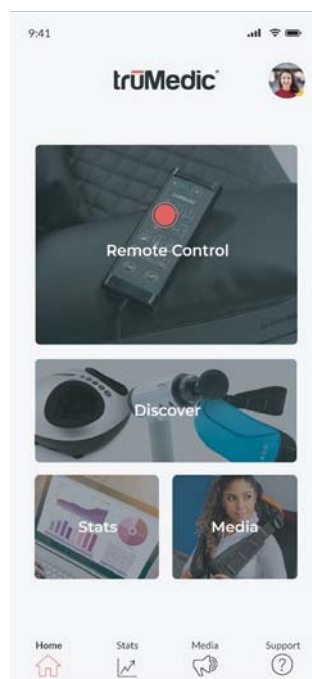

3 Sélectionnez
"Connecter un appareil"

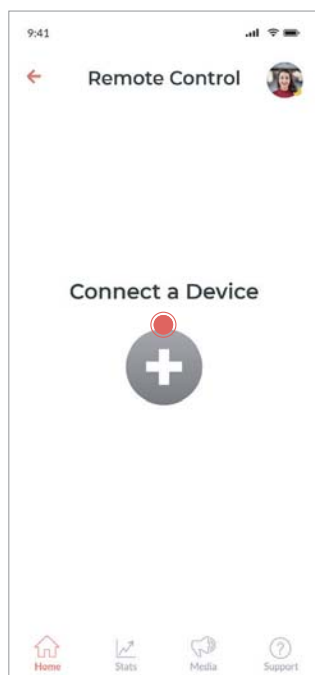


4 Allumez votre le masseur
de pieds IS-4000




Connexion à l'application truMedic®

Après avoir téléchargé l'application truMedic®, suivez les étapes suivantes pour connecter votre appareil:

5 Choisissez le dispositif que vous souhaitez coupler

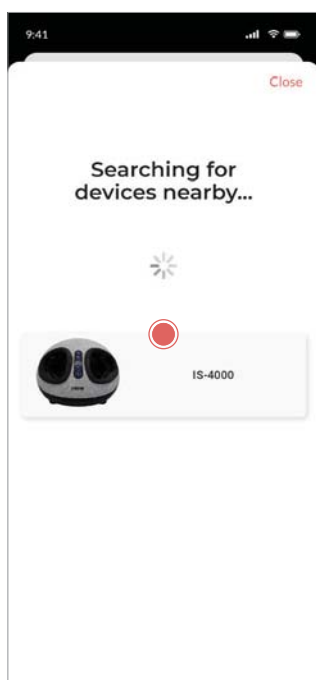

6 Contrôlez votre nouveau le masseur de pieds IS-4000

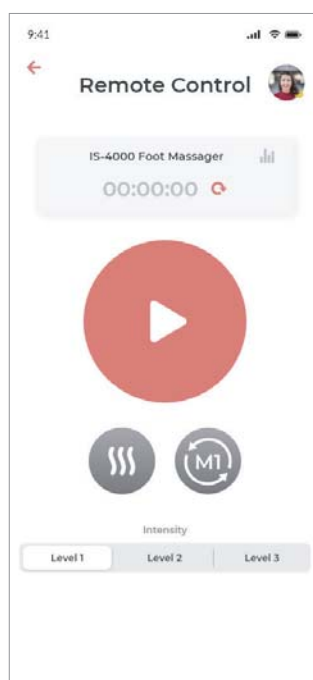

Télécommande de l'appareil

Contrôlez votre appareil dans l'application truMedic® App avec les fonctions suivantes:



Entretien de votre masseur de pieds de truMedic®

- Assurez-vous que le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® est éteint et débranché de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface du masseur de pieds de truMedic®. Ne rangez pas votre masseur de pieds IS-4000 de truMedic® dans un endroit chaud ou humide. Laissez votre appareil dans sa boîte lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation et rangez-la dans un endroit frais et sec.

Spécifications

Nom du produit :	Masseur de pieds IS-4000 de truMedic®
Modèle du produit :	ISS-4000i-GY
Tension nominale :	12V
Puissance nominale :	36W
Durée nominale d'utilisation :	Jusqu'à 20 minutes par séance

Dépannage

Problème	Solution
Le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'appareil est correctement branché dans une prise appropriée et allumé. Si l'appareil s'allume, mais que le masseur ne fonctionne pas, contactez truMedic® pour le service.
Le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® s'est arrêté subitement.	- Vérifiez que l'appareil est branché et allumé. - La limite de temps a été atteinte. L'appareil s'éteint automatique après 20 minutes d'utilisation. - L'appareil a surchauffé et la fonction de protection de température a éteint l'appareil. Patientez jusqu'à ce que l'appareil ait complètement refroidi avant de reprendre l'utilisation. - Trop de force a été appliquée sur les pièces massantes à l'intérieur du masseur de pieds IS-4000 de truMedic®. Assurez-vous de garder vos pieds détendus lorsqu'ils sont insérés dans le masseur de pieds IS-4000 de truMedic®. Ne vous mettez pas debout sur l'appareil et n'appliquez pas une force excessive contre les mécanismes internes de l'appareil.

*Vous avez des questions? Appelez sans frais à notre service d'assistance téléphonique au (888) 264-1766 ou visitez **support.trumedic.com***

Garantie

truMedic® garantie que ce produit n'a pas de défauts de matériel ou de conception pendant une période de 6 mois à partir de l'achat de l'acheteur original. **Vous devez enregistrer votre produit dans les 10 jours pour augmenter gratuitement votre garantie de 6 mois à un an.** Dans le cas où une réclamation valide est effectuée pendant la période de garantie, truMedic® réparera le défaut ou remplacera l'appareil sans frais en utilisant des pièces neuves ou remises à neuf à sa discrétion. Une preuve d'achat est requise avant de recevoir un service avec la garantie.

Le service de garantie peut s'obtenir en appelant le service à la clientèle truMedic® au **(888) 264-1766** ou par courriel à service@truMedic.com. Vous êtes responsable de la livraison et du coup de la livraison du produit à un centre de service truMedic® pour le remplacement ou la réparation, et truMedic® paiera les frais de livraison sur les retours.

12 La garantie ne couvre pas les dommages causés par le non-respect des instructions, ou les dommages causés par les accidents, l'abus, la mauvaise utilisation, les incendies, les inondations, les tremblements de terre ou autres causes externes, ou autres dommages causés par des réparations non autorisées.

TRUMEDIC® N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉQUENTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DÉCOULANT LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE. DANS LE CADRE PRÉVU PAR LA LOI EN VIGUEUR, TRUMEDIC® DÉCLINE TOUTES RESPONSABILITÉS DE GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, DONT, ET SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, DE FITNESS POUR UN BUT PARTICULIER, ET LES GARANTIES CONTRE DES DÉFAUTS LATENTS OU CACHÉS. SI TRUMEDIC® NE PEUT PAS LÉGALEMENT DÉCLINER LA RESPONSABILITÉ DES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, ALORS DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES SERONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE.

Certains États interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou conséquents, ou la durée d'effet de la garantie implicite, alors l'exclusion ou la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers, et vous pourriez avoir d'autres droits selon les États.

Autres produits truMedic®



MagicHands™

Masseur pour le cou et le dos



L'appareil de massage du cou et du dos à chaleur truMedic® MagicHands™ truShiatsu™ est notre appareil de massage le plus avancé et le plus performant à ce jour. Ce masseur est conçu avec un mécanisme en instance de brevet qui est fait pour recréer le toucher d'une masseuse professionnelle. Il délivre un massage puissant si réaliste que vous croirez qu'il provient d'un ensemble de mains humaines !


Couleurs disponibles :   

Dream Machine™

Oreiller de massage



Massez-vous dans un sommeil profond avec le nouveau Dream Machine truShiatsu, le masseur d'oreillers rechargeables à chaleur de truMedic. Aucun fil n'est nécessaire ! L'oreiller.

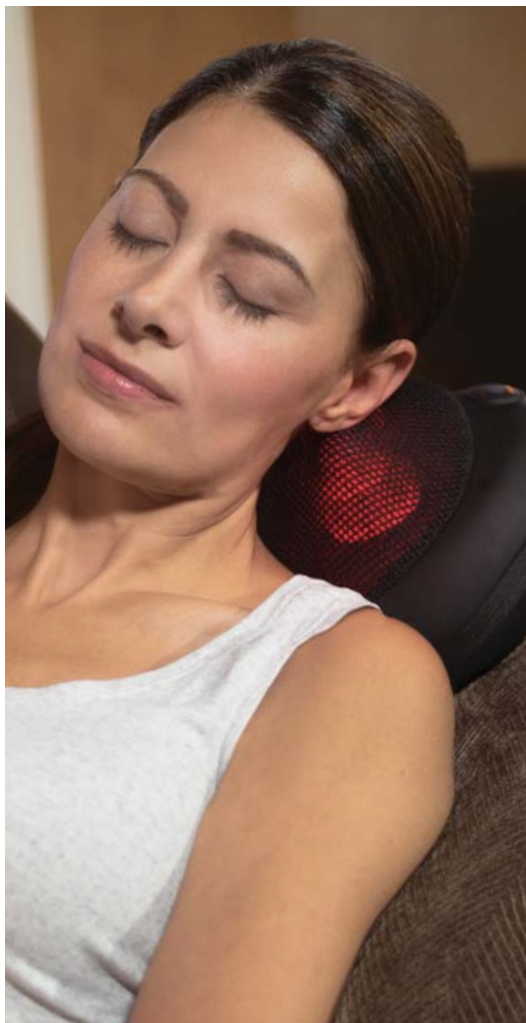

Appareil truRelief™ IMPACT Therapy™



L'appareil truRelief™ IMPACT Therapy™ est spécialement conçu pour fournir un impact rapide et performant qui vous laisse une sensation de détente et de rajeunissement. Vous pouvez accélérer votre processus de récupération, améliorer votre amplitude de mouvement et soulager votre stress grâce à la puissance de son moteur silencieux et sans balais.

Couleurs disponibles :   





TRUCORE DISTRIBUTORS, INC.

252 Indian Head Rd. Kings Park, NY 11754
(888) 264-1766 | service@truMedic.com | www.truMedic.com



@truMedicMassage

Model/Modèle/Modelo: ISS-4000i-GY

truMedic®

Série intelligente

Masajeador de Pies IS-4000



Manual de Instrucciones

English (P.1) / Français (P.27) Español (P.53)

Masaje Profesional

El Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 le permite disfrutar de un masaje de pies profesional donde lo desee y cuando lo desee. El diseño ergonómico y único complementa perfectamente la estructura de su pie y proporciona un relajante y agradable masaje de pies. De acuerdo con los principios del masaje oriental, esta unidad tiene tres niveles de intensidad, que van de leve a fuerte. Tenga cuidado al elegir la configuración que mejor se adapte a su tolerancia al masaje y comience con la configuración de fuerza más baja hasta que se acostumbre a la sensación.



Declaración de la FCC

PRECAUCIÓN: Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

Cuando use un electrodoméstico, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Siempre desenchufe este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- No trate de alcanzar un artefacto que se haya caído al agua. Desenchufelo inmediatamente.
- No lo use mientras se baña o se ducha.
- No coloque ni guarde la unidad donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A PERSONAS:

- Nunca se debe dejar sin atención un electrodoméstico cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, y antes de colocar o quitar piezas.
- No lo opere debajo de una manta o almohada. Se puede producir un calentamiento excesivo y provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- Es necesaria una supervisión estricta cuando este aparato sea utilizado por, en o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.
- Use este aparato solo para su uso previsto como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este artefacto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se cayó o se dañó, o si se lo dejó caer en el agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación.
- No transporte esta unidad cargándola por el cable de alimentación ni use el cable como agarradera.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y similares. Nunca opere sobre una superficie blanda como una cama o sofá donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo use al aire libre.
- No opere donde se usan productos en aerosol (spray) o donde se administra oxígeno.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición de apagado, luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- No use el masajeador cerca de ropa suelta o joyas.
- Mantenga el cabello largo alejado del masajeador mientras está en uso.

NOTA 1: El Masajeador de Pies IS-4000 no está diseñado para que lo utilicen personas con determinadas afecciones médicas, tales como presión arterial alta, diabetes, enfermedades cardíacas, arteriosclerosis cerebral, trombosis cerebral, tumores malignos u osteoporosis. Consulte con su médico si tiene alguna de las condiciones anteriores o similares antes de usar este dispositivo.

NOTA 2: Este masajeador ofrece una variedad de presiones de masaje de suave a muy fuerte. Siempre comience a usar este masajeador en la configuración de baja intensidad en el modo 1. Si comienza a sentirse demasiado intenso, presione inmediatamente el botón de encendido para liberar la presión.

NOTA 3: Este masajeador no es un dispositivo médico y no está destinado a tratar ninguna enfermedad o dolencia específica. Para recibir la atención médica adecuada, comuníquese con su proveedor de atención médica o con un profesional médico. **POR FAVOR LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.**

POR FAVOR, LEA Y OBSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR Y GUÁRDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Pies truMedic® IS-4000 no debe ser utilizado por personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implant.
- No use el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 si ha recibido tratamiento previo por una lesión o enfermedad, o si actualmente recibe atención médica o tiene una disfunción articular que incluye reumatismo.
- No use el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 mientras se encuentre bajo la influencia del alcohol.
- No se pare en el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000.
- No opere su Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 en ambientes húmedos, como por ejemplo cerca de piscinas o baños.
- No opere su Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 en ambientes polvorientos o sucios.
- No opere al aire libre su Masajeador de Pies truMedic® IS-4000

- Mantenga el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 lejos de fuentes de calor como estufas eléctricas, radiadores o calentadores.
- No coloque el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 bajo luz solar directa ni lo guarde en un ambiente caluroso.
- Su Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 tiene una función de protección térmica automática. Si la unidad se sobrecalienta con el uso, se apagará para evitar daños internos. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe antes de intentar usarla.
- La función de calor puede hacer que la unidad se caliente. Tenga cuidado al usar la función de calor y permita que la unidad se enfríe completamente entre usos.
- El Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 está diseñado para usarse durante 20 minutos por sesión. No use el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 por más de 30 minutos.
- No use el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 mientras duerme.
- Mantenga los objetos filosos alejados del Masajeador de Pies truMedic® IS-4000. Si las cubiertas de los pies de tela se dañan, deje de usar la unidad y póngase en contacto con truMedic® para obtener servicio técnico.
- No intente reparar su Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 ni use repuestos que no hayan sido proveídos por truMedic®. Si su unidad está rota, póngase en contacto con truMedic® para obtener servicio.
- No inserte ningún objeto extraño en el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000.
- No transporte la unidad por el cordón de alimentación o los insertos de los pies.
- No use el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 si las aberturas de aire están bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y otros objetos extraños.
- Este masajeador tiene un dispositivo de protección de circuito para evitar el sobrecalentamiento, así como protección contra sobrecarga de corriente.

INCLUIDO EN LA CAJA*

- Masajeador de Pies truMedic® IS-4000
- Adaptador de poder



*Las fotos y dibujos son solo con fines ilustrativos

Operación

- El Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 tiene cinco botones para usar:



Encendido/Apagado



Modo de Masaje



Calor



Intensidad



Temporizador

- Enchufe la unidad en un tomacorriente de pared para obtener energía. La unidad estará en "Modo Listo" y el botón de encendido LED se iluminará.



Encendido

Presione el botón de encendido para comenzar a usar la unidad. El Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 está diseñado para usarse durante 20 minutos por sesión. No use el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 por más de 20 minutos en una sola sesión.



Modo de Masaje

Use el botón Modo para seleccionar un modo de masaje. El Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 presenta tres modos de masaje inteligentes:



Luz LED azul constante

1. Presione el botón del Modo de Masaje una vez para ingresar al Modo 1, indicado con una luz azul. El Modo 1 es un masaje de pies rodante y presión de aire suave.



Luz LED rojo constante

2. Presione el botón del Modo de Masaje por segunda vez para ingresar al Modo 2, que se indica con una luz roja. El modo 2 es un masaje de pies rodante con un uso más frecuente de presión de aire.



Alternando luz LED roja y azul

3. Presione el botón del Modo de Masaje por tercera vez para ingresar al Modo 3, que se indica alternando luces rojas y azules. El Modo 3 usa presión de aire frecuente y muy poco uso de los masajeadores rodantes.



Calor

Presione el botón de calor para encender o apagar la función de calor. La unidad iniciará automáticamente la función de calentamiento cuando se presione el botón de Encendido y esté indicado con una luz azul. Presione el botón de calor para desactivar la función de calentamiento.



Encendido



Apagado



Intensidad

Use el botón de intensidad para ajustar la intensidad de la función de compresión de aire. Cuando el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 se enciende, la función de compresión de aire automáticamente cambiará a baja intensidad, indicada con una luz azul. Presione el botón de intensidad para pasar a la intensidad media, indicada con una luz verde. Presione el botón de intensidad una vez más para pasar a una intensidad alta, indicada con una luz roja.



Intensidad Baja



Intensidad Media



Intensidad Alta



Temporizador

Use el botón del temporizador para establecer un límite de masaje de 10, 15 o 20 minutos. La unidad se apagará automáticamente al completar el ciclo de masaje seleccionado.



10 Min



15 Min



20 Min

NOTA: El Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 tiene un tiempo de funcionamiento de 20 minutos y se apagará automáticamente después de cada sesión.




Sesiones de hasta 20 minutos


Conexión a la aplicación truMedic®

Después de descargar la aplicación truMedic®, complete los siguientes pasos para emparejar su dispositivo:


1 Crea una cuenta

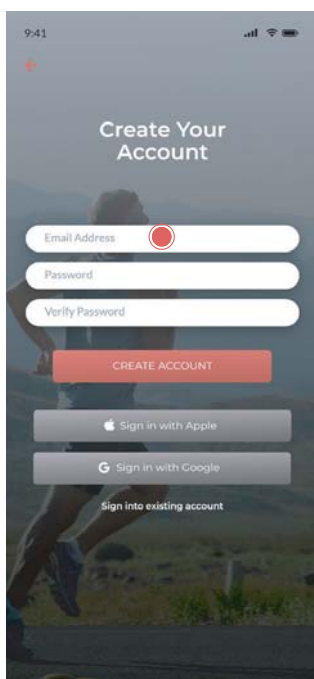

2 Seleccione "Control remoto"

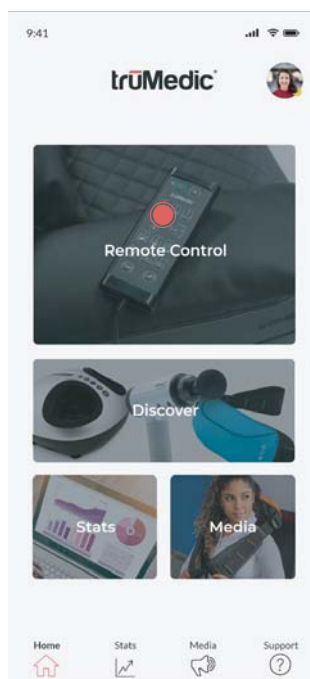

3 Seleccione "Conectar un dispositivo"

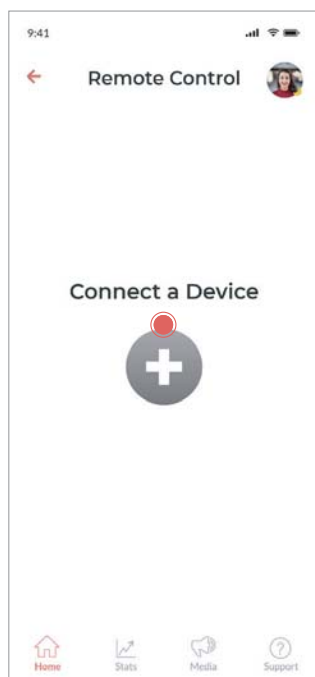


4 Enciende tu el Masajeador de Pies IS-4000




Conexión a la aplicación truMedic®

Después de descargar la aplicación truMedic®, complete los siguientes pasos para emparejar su dispositivo:

5 Elija el dispositivo que desea emparejar

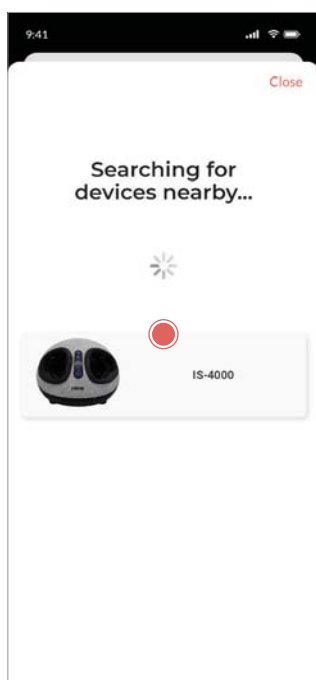

6 Controla tu nuevo el Masajeador de Pies IS-4000

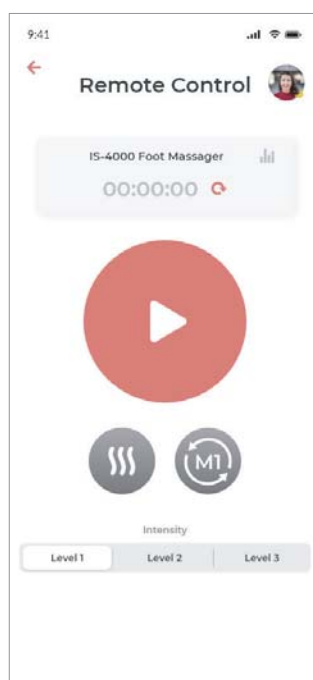

Control remoto del dispositivo

Controle su dispositivo en la aplicación truMedic® con las siguientes funciones:



El cuidado de su Masajeador de Pies truMedic® IS-4000

- Asegúrese de que el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 esté apagado y desenchufado de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- No use limpiadores corrosivos o abrasivos. Use un paño seco para limpiar la superficie del Masajeador de Pies truMedic® IS-4000.
- No guarde su Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 en ambientes calientes, húmedos o húmedos. Mantenga su unidad en la caja cuando no esté en uso, y guárdela en un lugar fresco y seco.

Especificaciones

Nombre del Producto:	Masajeador de Pies truMedic® IS-4000
Modelo del Producto:	ISS-4000i-GY
Voltaje:	12V
Potencia:	36W
Duración de Uso:	20 minutos por sesión

Solución de Problemas

Problema	Solución
El Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 no funciona.	• Asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada a un tomacorriente adecuado y encendida. Si la unidad se enciende, pero el masajeador no funciona, póngase en contacto con truMedic® para obtener servicio.
El Masajeador de Pies truMedic® IS-4000 se apaga repentinamente.	• Verifique para asegurarse de que la unidad esté enchufada y encendida. • Se ha alcanzado el límite de tiempo. La unidad se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso. • La unidad se ha sobrecalentado y la función de protección de temperatura ha apagado la unidad. Espere hasta que la unidad se haya enfriado por completo antes de reanudar el uso. • Se ha aplicado demasiada fuerza a las piezas de masaje dentro del Masajeador de Pies truMedic® IS-4000. Asegúrese de mantener los pies relajados cuando los inserte en el Masajeador de Pies truMedic® IS-4000. No se pare mientras usa la unidad ni ocasione que se aplique una fuerza excesiva a los mecanismos internos de la unidad.

¿Tiene preguntas? Llame a nuestra línea gratuita al **(888) 264-1766**
o visite **support.trumedic.com**

Garantía

truMedic® garantiza este producto contra defectos en materiales y/o mano de obra por un período de 6 Meses a partir de la fecha de compra por parte del comprador original. En caso de una reclamación válida dentro del Período de Garantía, truMedic® reparará el defecto o reemplazará la unidad sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o restauradas a su discreción. Se requiere comprobante de compra antes de recibir el servicio bajo esta garantía.

El servicio de garantía está disponible llamando al servicio truMedic® al 888.264.1766 o por correo electrónico a service@truMedic.com. Las reparaciones/reemplazos deben ser autorizadas por truMedic® antes de que se brinde el servicio. Usted es responsable de la entrega y el costo de la entrega del producto hacia y desde un centro de servicio truMedic® para su reemplazo o reparación según nuestras instrucciones.

Esta garantía no cubre los daños causados ??por el incumplimiento de las instrucciones o daños causados ??por accidente, abuso, mal uso, incendio, inundación, terremoto u otras causas externas, o daños causados ??por reparaciones no autorizadas.

TRUMEDIC® NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O QUE SURJAN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, TRUMEDIC® NIEGA CUALQUIER GARANTÍA LEGAL O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI TRUMEDIC® NO PUEDE RENUNCIAR LEGALMENTE A LAS GARANTÍAS REGLAMENTARIAS O IMPLÍCITAS, ENTONCES EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TODAS DICHAS GARANTÍAS ESTARÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o la duración de una garantía implícita, por lo que las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.

Otros Productos truMedic®



MagicHands™

Masajeador de cuello
y espalda



El masajeador de cuello y espalda con calor truMedic® MagicHands™ truShiatsu™ con calor es nuestra unidad de masaje más avanzada y de alto rendimiento hasta ahora. Este masajeador está diseñado con un mecanismo pendiente de patente que está hecho para recrear el toque de una masajista profesional. Ofrece un masaje poderoso que es tan realista que creará que proviene de un par de manos humanas!

Colores disponibles:




Dream Machine™

Masajeador de Almohada



Masajee para dormir profundamente con el nuevo y avanzado Dream Machine™ truShiatsu™ masajeador de almohada recargable con calor de truMedic. ¡No se requieren cables! El masajeador de almohadas recargable Dream Machine es una excelente adición a cualquier sofá, silla o cama.

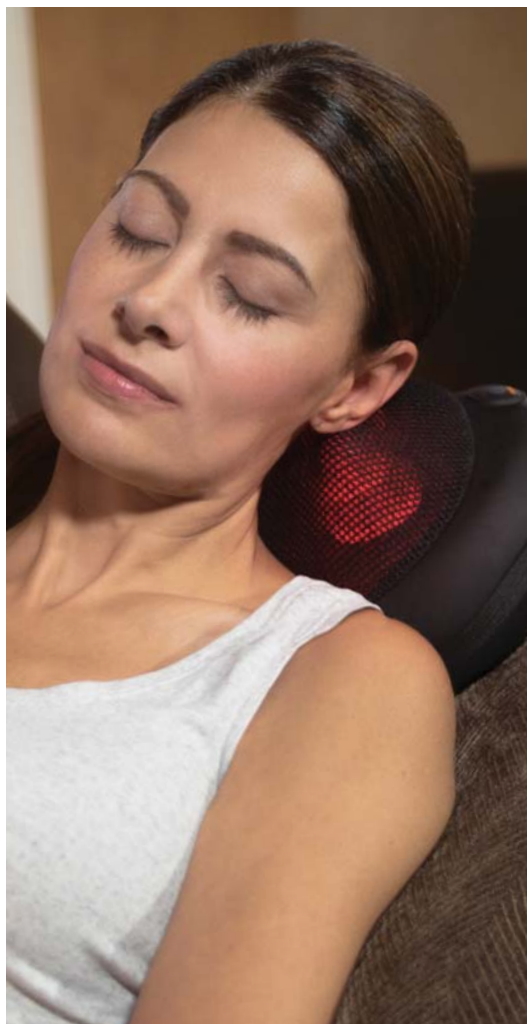

Dispositivo truRelief™ IMPACT Therapy™



El dispositivo truRelief™ IMPACT Therapy™ está especialmente diseñado para proporcionar Impact Therapy™ rápido y de alto rendimiento que lo deja sintiéndose relajado y rejuvenecido. Puede acelerar su proceso de recuperación, mejorar su rango de movimiento y aliviar el estrés con la potencia de su motor silencioso y sin escobillas.

Colores disponibles:





TRUCORE DISTRIBUTORS, INC.

252 Indian Head Rd. Kings Park, NY 11754
(888) 264-1766 | service@truMedic.com | www.truMedic.com



@truMedicMassage

Model/Modèle/Modelo: ISS-4000i-GY