



非常感谢您使用 Occlin 智能声波电动牙刷。

这是一款主打智能的声波电动牙刷产品，请仔细阅读本说明书以快速掌握，可配合 App 使用，了解更多刷牙详情。

口腔敏感者，如下情况需注意

- 刚接受过口腔牙周手术或正在治疗的人士。
- 口腔内有其他症状，包括假牙不牢固或牙龈持续大量出血的人士。
- 其他口腔敏感脆弱的人群等。
- 不建议使用本产品，或在使用前咨询专业的牙科医生。
- 本产品不适合伤残人士、精神病患者或者缺乏相关经验知识的人士使用（包括儿童（0-12 岁））。除非在医护人员监督下使用。

使用指南

- 首次开机
首次使用牙刷，短按“开关键”，牙刷将被唤醒，蓝牙也将长期开启状态，可以通过下载安装“欧克林 App”在 App 里面完成牙刷的连接与设置，App 安装并设置牙刷。
- 直接触控屏幕设置牙刷
不连接 App 也可以通过触控屏幕进行设置，可以在清洁、按摩、美白、敏感四种模式中切换，并调节长和力度。

- 计时与刷牙模式提示
刷牙的刷牙方案刷牙时长为 2 分钟，每 30 秒会有一次振动状态的提示改变，以提醒用户需要更换牙齿区域或进行刷牙。

- 刷牙报告
刷牙结束后，本产品显示屏上会显示出您本次刷牙的刷牙时间，获得的刷牙分数，以及刷牙盲区提示。

- 刷牙模式设置
通过上下滑动显示屏或屏幕边缘左右两侧，进入刷设置——如：“刷牙模式”设置，设置完成以后会自动记忆，此后再运行将按照新设置进行。

- 力度调节
设置力度时，上下滑动屏幕，力度档位变化为“加 1”或“减 1”，上下滑动屏幕边缘，力度档位变化即为“加 5”或“减 5”。



在放置时，务必确保正反面朝上。



注意

如果您需要更详细的产品使用信息，可关注 Occlin 公众号



官方售后服务号

Occlin 欧克林 App 应用

- 新到更新图标
有新的活动信息、软件更新推送，或其他提示信息会出现此图标。




清洁保养



产品规格

品名	Occlin 智能声波电动牙刷
型号	Y2088
版本	Pro Elite
额定功率	0 dBm
防水等级	IPX7
主体功率	1.5W
充电	Occlin 无线充电式座充
输入	5V ± 0.3A
工作时间*	20天 (32级力度), 40天 (级力度)
电池容量	800 mAh
充电时间	3.5小时
执行标准	Q/SZYD Y2021
蓝牙	Bluetooth 5.0 以上

* 清洁模式下，按照 2 分钟/次，2 次/天的工作状态下计算。

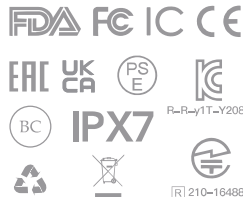

备注

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863 规定的限量要求以下。
- × 表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863 规定的限量要求。
- 表示不适用电池，电池的有害物质限值参照电池指令 (Battery directive: 2006/66/EC and amendment 2013/56/EU.)
- * 本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限的请放心使用本产品。

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	
振动马达	×	○	○	○	○	○	10 年
附件	○	○	○	○	○	○	5 年
电池	○	○	○	—	—	—	5 年



部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 年
塑胶件	○	○	○	○	○	○	5 年
五金件	○	○	○	○	○	○	5 年
FPC	○	○	○	○	○	○	5 年



Occlin 智能声波电动牙刷二包凭证

用户信息	销售商信息	产品信息
姓名: _____ 联系电话: _____ 电子邮件: _____	销售商名称: _____ 联系电话: _____ 发票号码: _____	机型: _____
地址: _____ 邮政编码: _____	地址: _____ 邮政编码: _____ 销售日期: _____	生产地点: _____

Occlin 智能声波电动牙刷保修卡


送修日期	故障描述/故障原因/处理结果	使用设备	交验日期	维修人员

请向维修中心索取维修报告书，并与保修凭证一同妥善保管。（左侧页）


深圳市云顶信息技术有限公司严格按照《家用电器修理更换退货责任规定》，为购买 Occlin 智能声波电动牙刷的消费者实行三包。若服务条款与三包规定有不符之处，以三包规定及三包凭证内容为准。

如您购买的产品出现故障时，请联系我们的服务热线电话：4008-365-909

制造商：深圳市云顶信息技术有限公司
制造商地址：深圳市南山区粤海街道办事处铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心（三期）3 栋 28G
生产地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 4 号厂房 4 楼东侧
公司官网：www.occlin.com

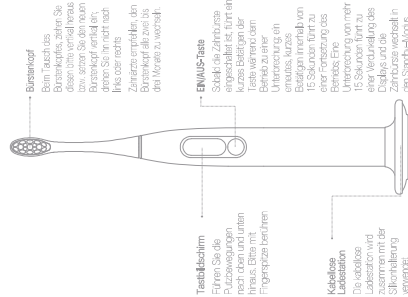

Montage der Unterseite der Wandhalterung
Stellen Sie beim Einsetzen der Zahnbürste in die Wandhalterung sicher, dass diese nach oben zeigt.

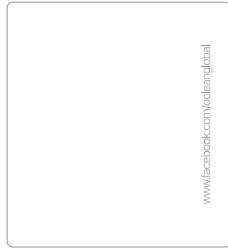

www.facebook.com/ocleanglobal

Danke, dass Sie sich für die Elektrische Zahnbürste Smart Sonic von Oclean entschieden haben.

Dies ist die elektrische Zahnbürste smart sonic. Bitte lesen Sie sich das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um Ihre neue Zahnbürste möglichst rasch in Betrieb nehmen zu können. Die Zahnbürste kann mit der dazugehörigen App verwendet werden. Weiter unten können Sie mehr über das Putzen Ihrer Zähne mit dieser Zahnbürste erfahren.

Hinweis für Verwender, auf die folgende Umstände zutreffen

- Kürzlich durchgeführte chirurgische parodontal eingriffe oder noch immer andauernde Behandlung.
- Andere orale Symptome – inkl. beweglicher/instabiler Zahnprothesen oder anhaltendem, starkem Zahnfleischbluten.
- Sonstige, orale Empfindlichkeiten bzw. Probleme. Für die oben angeführten Personen, wird die Verwendung dieses Produktes nicht empfohlen bzw. sollte vorher ein Zahnarzt zu Rate gezogen werden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Menschen mit Behinderung, psychischer Erkrankung oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen geeignet (einschließlich Kindern (0-12 Jahre)). Außer, es wird unter Aufsicht einer entsprechenden Aufsichtsperson verwendet.

Bedienungsanleitung

Erstmaliges Einschalten des Produkts

Um die Zahnbürste zum ersten Mal zu verwenden, drücken Sie bitte kurz die „Ein“-Taste, was zum Einschalten des Produkts und zur Aktivierung der Bluetooth-Funktion (und Beibehaltung des Modus „Immer eingeschaltet“) führt. Sie können die „Oclean-App“ herunterladen und installieren, um dann anschließend die Zahnbürste mit der App zu verbinden und Einstellungen in der App vorzunehmen. Installieren Sie die App und Setup der Zahnbürste.
Um die Installation der App abzuschließen, scannen Sie den QR-Code, was es Ihnen ermöglichen wird, verschiedene Funktionen für Ihre Zahnbürste einzustellen – wie z.B.: Ein-/Ausstellen der Funktionen „Ändern der Putzbereich-Benachrichtigung nach 30 Sekunden“, „Zahnschutz mittels automatischer Frequenzreduzierung“, etc. Zusätzlich können Sie außerdem Ihr eigenes Bürstenprogramm individuell einstellen und anpassen, sowie dieses direkt an Ihre Zahnbürste senden.

Berühren Sie den Bildschirm, um das Setup der Zahnbürste vorzunehmen

Das Setup der Zahnbürste kann über den Touchscreen auch ohne Verbindung zur App vorgenommen werden. Sie können zwischen vier Modi wählen: Putzen, Massage, Whitening und Sensitive, sowie die Dauer und Intensität auswählen.

Wenn etwaige Änderungen des Modus, der Intensität oder der Dauer, nach Erhalt des von der App weitergeleiteten Bürstenprogramms, am Touchscreen vorgenommen werden, so führt die Zahnbürste die zuvor von der App weitergeleiteten Bürstenprogramm nicht mehr aus.

Benachrichtigung zu Änderungen des Timers und zum Wechsel des Putzbereichs

Die Standard dauer des Bürstenprogramms beträgt 2 Minuten, während welcher sich das Vibrationsmuster alle 30 Sekunden ändert, um den Verwender daran zu erinnern, den Putzbereich zu wechseln.

Zahnputzbericht

Nachdem Sie mit dem Putzen fertig sind, zeigt das produkt display Ihre Putzzeit, Ihren Putz-Punktestand und Hinweise zu Flecken, die Sie beim Putzen übersehen haben, an.

Einrichten des Putzmodus

Navigieren Sie zu den Einstellungen, indem Sie auf dem Display nach oben und unten oder nach links und rechts vom Bildschirmrand wischen – z.B.: Einstellung des „Putzmodus“. Sobald der Setup abgeschlossen ist, speichert die Zahnbürste die Einstellungen automatisch und der nachfolgende Betrieb erfolgt gemäß den neuen Einstellungen.

In den Intensitätseinstellungen können Sie mittels Wischen am Bildschirm nach oben und unten, das Intensitätslevel auf „Plus 1“ oder „Minus 1“ bzw. durch Wischen am Bildschirmrand nach oben und unten zu „Plus 5“ oder „Minus 5“ einstellen



Nach oben und unten Wischen



Bewegen Sie die Zahnbürste langsam mit einem 45-Grad-Winkel zwischen der Bürste und der Gingiva. Es besteht keine Erfordernis, die Bürste während dem Putzen manuell hinauf- und hinunter zu bewegen.



Halten Sie den Griff der Zahnbürste sanft, führen Sie langsame, Kreisbewegungen durch und üben Sie bitte keinen übermäßigen Druck aus.



Nach dem Putzen bitte mit klarem Wasser gurgeln und den Mund ausspülen.



Mit Leitungswasser abspülen und lufttrocknen; nicht an den Borsten der Zahnbürste ziehen

A

1. Sie sollten das Gerät NICHT zerlegen, darauf einschlagen, Druck darauf ausüben oder es ins Feuer werfen.
2. Verwenden Sie die Zahnbürste NICHT, wenn das Produkt beschädigt ist oder Flüssigkeit aus der Batterie austritt.
3. Setzen Sie die Batterie KEINEN hohen Temperaturen aus.
4. Verwenden Sie die Batterie NICHT, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt war.
5. Setzen Sie KEINE Metallgegenstände, außer der Zahnbürste, in die Ladestation ein.
6. Bevor das Gerät entsorgt wird, muss die Batterie entfernt werden.
7. Das Gerät muss vor der Batterieentnahme ausgeschaltet werden.
8. Die Batterie muss sicher entsorgt werden.



