



Date Of Manufacture

生产日期: _____

Inspection Result

检查结论: _____

Inspector No

检验员号: _____

福建迅泰电子科技有限公司

FUJIAN XUNTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

地址: 福建省福安市秦溪洋工业区上村143号

Address: No.143, Shangcun, qinxiyang Industrial Zone,

Fu'an City, Fujian Province

全国服务热线: 4000-666-768

National Service Hotline: 4000-666-768

Smart Neck Massager

智能颈椎按摩器

MODEL#XT-S600

欧思梦
Oseemoon
颈椎不痛好入梦



来自欧洲的生活方式

简体中文 | SC ——— 01-14

英文 | EN ——— 15-30

Dear顾客朋友:

感谢您购买Oseemoon的产品。

因为信任与缘分每天有成千上万的顾客朋友与Oseemoon结缘。正因为你们的信任，我们既感到内心无比的欣喜又感到身上的责任十分的重大。为了不辜负广大顾客信任，我们不惜重金聘请20多位高级工程师加盟Oseemoon。经过我们团队的不断努力，我们的产品畅销海内外20多个国家，产品受到众多新老客户的一致好评与青睐。我们能在健康产业的浪潮中迅速前行是因为我们对我们每一件产品的精益求精以及用心的尊重每一位顾客的感受。顾客体验后的感受才是最有说服力的广告，因为我们基本不做广告，好多新的顾客朋友都是老的顾客朋友推荐的，由此可见，产品与品牌以及服务的口碑才是最重要的，这也是我们感到最成功的地方。

我们与广大的顾客朋友一致认为，健康是一种态度，更是一种责任！为人类健康保驾护航是我们企业存在的唯一理由！我们一定会不忘初心，努力为人类的健康产品不断的研究与探索，竭尽所能的为人类健康添砖加瓦。同时，我们非常欢迎广大的顾客朋友给我们更多的建议，企业的发展离不开市场真实的声音。在此，我仅代表Oseemoon企业对广大顾客朋友的信任表示诚挚的感谢！

如果您在购买或使用Oseemoon产品过程中，对我们的服务有任何不满意的地方，您可以直接给我们电话。电话: 4000-666-768 (8:30-24:00)。

让客户满意是我们的义务，让客户感动才是我们的追求！

感谢您使用本公司生产的智能颈椎按摩器。在使用前,请您详细读懂本说明书的内容,正确地掌握本产品的操作与使用方法,以便更好的享受它给我们带来的按摩享受,相信它会给您和您的家人的生活增添更多的愉悦与乐趣。

请您保留好说明书,以备日后查阅。如果您在使用过程中遇到任何问题,请与我们Oseemoon售后服务网点或本公司联系,我们将竭诚为您服务,感谢您的合作!

目 录

目录	1
注意事项	2
技术参数	6
电气原理图	6
产品示意图	7
操作方式	8
温馨提示	9
日常保养	9
故障排除	10
产品及零部件回收说明	11
产品废弃时注意事项	12
产品保修卡	13

本产品属于家用产品,请勿用于商业用途。

由于我们不断地改进我们的产品,因此如果技术规格有任何改变,恕不另行通知。

注意事项

⚠ 危险

本产品禁止与以下的医用电子器械以及场所一起使用:

1. 心电图仪等医用电子器械;
2. 心脏起搏器等体内植入型医用电子器械;
3. 人工心肺等维持生命用医用电子器械;
* 如果本产品与以上所说的医疗器械一起使用的情况下,会造成这些医用电子器械产生错误动作,可能会危及生命,请务必熟知并遵守;
4. 加油站、化工厂、高粉尘车间、煤气等易燃易爆场所禁用。
5. 本产品禁止边充电边使用。

⚠ 警告

- 本产品禁止与患者在身上使用高频手术设备时同时使用,产品电极片部位可能引起烧伤,也可能损坏产品,所以禁止同时使用。
- 本产品禁止在短波或微波治疗设备附近使用,产品的功能输出可能不稳定,也可能会影响其医疗设备的正常功能。
- 本产品按摩时,电极片须避免接触伤口及瘢痕,以免带来不适。
- 本产品按摩时,电极片不可置于胸部心脏附近,否则会增加心脏纤颤的危险。
- 产品建议一个用户使用。交叉用户使用时,请清洁产品上的电极片后使用,请注意清洁卫生。
- 使用本产品时须将电极片紧密的贴合在皮肤上,均匀接触,否则可能会带来轻微的刺痛感。
- 本产品电极片具有加热功能,同一部位长时间(不超过15分钟)使用加热功能时可能会导致低温烫伤皮肤。
- 如果使用本产品过程中或使用后出现身体不适,请立即停止使用,并咨询医生。
- 本产品含有锂电池,请勿重摔、自行拆卸、改装、水浸产品或投掷火中,否则可能会导致产品损坏或锂电池爆炸。

- 下列情形，请向医生咨询后使用。否则可能会发生事故或引起身体不适。
 1. 正在接受医生治疗、并感觉身体异常的患者。
 2. 患有心脏疾病以及脑神经异常的患者。
 3. 体温超过37.8度（发热期）的患者。
 4. 患有感染性疾病的患者。
 5. 皮肤知觉障碍或皮肤异常的患者。
 6. 正在服用药物的患者。
 7. 血压异常的患者。
 8. 不能自由表达自己意愿的患者。
 9. 由于糖尿病等造成高度末梢循环障碍而产生知觉障碍的患者。
 10. 皮肤对不锈钢电极片过敏的患者。
- 下列情形禁止使用
 1. 恶性肿瘤患者
 2. 有出血倾向的患者
 3. 孕妇、产妇
 4. 急性化脓性炎症患者
 5. 心脏起搏器使用者
 6. 金属内置物患者
 7. 人体的心脏附近
- 请勿在心脏附近、颈部上方、头部、口腔、阴部或皮肤疾患等部位使用且不能同时按摩双脚脚底以及双手手掌。另外，使用时不要压迫内脏。否则可能会发生事故或引起身体不适。
- 请勿与其他医疗器械或2台以上本产品一起使用，否则可能会引起功能异常或身体不适。
- 请勿用于使用说明书中所记载的按摩以外的目的，否则可能会发生事故，产生故障。
- 请勿使用表面有缺口、损坏的电极片，否则可能会发生事故、产生故障。
- 请勿擅自拆卸、修理和改造本产品，否则可能会导致故障或触电事故。

⚠ 注意

- 如果在使用本产品感到身体不适时，请立即停止使用。
- 身体或皮肤如有异样的不适感，请向医生咨询并遵照医嘱行事。
- 在按摩过程中，若想将电极片移动位置或移动到其他人身上时，请禁止本产品与身体内外带有医疗电子设备同时使用，否则可能会使电子器械错误操作（如：电子手表时刻紊乱）。
- 发生不能运转的异常情况时，请立即切断电源并取下，否则可能会产生不适或事故。
- 需要充电时请勿用湿手插拔USB充电线，否则可能会导致触电或发生事故。
- 请勿给儿童或无表达意识能力的人使用，否则会引发事故或引起身体不适。
- 如果因本产品异常而感到身体不适时，请立即停止使用并将电源切断后再移动，否则可能会受到强烈电击不适。
- 请勿在浴室等湿度高的地方使用，或者边洗澡边使用产品，否则可能会受到强烈电击，并损坏产品。
- 就寝时请勿使用，否则有可能使本产品产生故障，另外电极片有可能被移到其他部位而产生身体不适。
- 驾驶汽车时请勿使用，否则可能因刺激过大引起身体不适，导致事故。
- 请勿将电极片长时间贴在患处，否则可能会引起皮炎。
- 在按摩时，请勿使头饰、项链等物品的金属部分接触电极片，否则可能会受到强烈电击。
- 请勿在同一部位长时间（30分钟以上）使用，否则可能使按摩部位肌肉疲劳引起身体不适。
- 请正确佩戴本产品，用于颈椎位，左右对称佩戴，否则可能会发生事故或引起身体不适。
- 从本产品上拔下USB充电线时，请勿拉拽导线，而应握住导线插头拔出，否则可能导致触电或损坏产品。

- 产品电极片具有表面发热功能，对热不敏感或容易热过敏体质的用户使用前，请咨询医生。
- 产品长时间工作时，表面会有发热的现象，这属于正常现象。
- 遥控器电池长期（超过3个月）不用时，请取出电池。
- 遥控器电池电量耗尽时，请尽快更换同型号的新电池，电池型号：CR2032。
- 遥控器电池更换时，切勿装反正负极。
- 遥控器电池用完后，请按照居住地的相关规定进行废弃处理。

⚠ 建议

- 请确认主机按钮正常工作后方可使用。
- 初次使用时，或产品长时间搁置后电池电量损耗，请按照使用说明书进行充电操作，确保其能正常工作。
- 废弃本产品时，请依照城市有关环境保护规定进行处理，否则可能会造成环境污染。
- 建议16周岁及以上的人群使用。
- 请勿在以下场所使用、存放本产品：
 - ① 阳光直射的场所
 - ② 高温多湿的场所
 - ③ 有水的场所
 - ④ 灰尘较多的场所
 - ⑤ 烟火附近
 - ⑥ 容易受到振动冲击的场所
 - ⑦ 强电磁场所
 - ⑧ 加油站加气站场所
 - ⑨ 液化气站场所
 - ⑩ 易燃易爆化工厂场所


技术参数

产品型号	XT-S600(白色)	额定电压	5V ---
额定功率	5W	执行标准	GB4706.1-2005

产品型号	XT-S600(酒红色)	额定电压	5V ---
额定功率	5W	执行标准	GB4706.1-2005

产品型号	XT-S600(宝蓝色)	额定电压	5V ---
额定功率	5W	执行标准	GB4706.1-2005


电器原理图

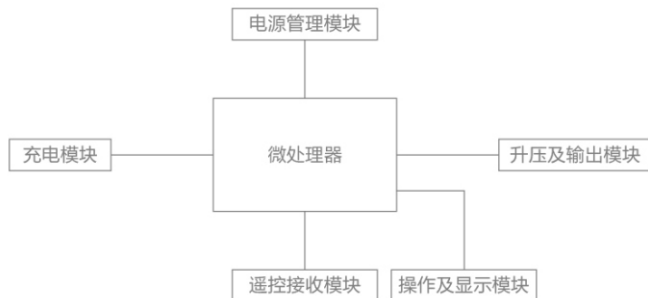


产品示意图



遥控器

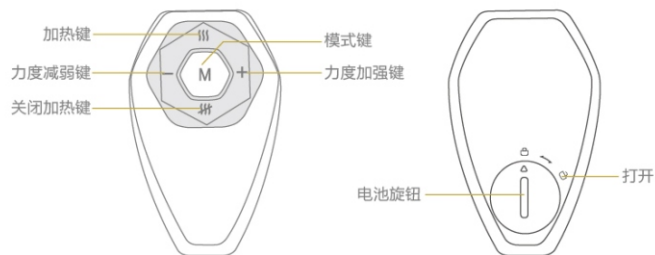

佩戴方式

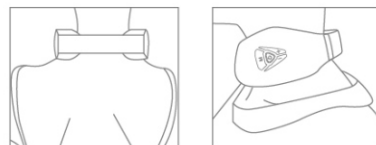

操作方法

1. 使用前，首先用湿毛巾将颈椎部位皮肤湿润，然后将产品戴到脖子上，使得电极片紧贴颈椎部位皮肤，调整好产品位置，开启主机并调节合适的按摩力度和模式。
2. 长按主机“”按钮两秒，主机开机（伴随蜂鸣器“嘀”声，提示灯亮起），进入默认模式，默认档位（0档）。开机状态下长按主机“”两秒，蜂鸣器“嘀嘀”两声，产品关机。（长按关机后需等待主机电源灯闪烁停止后才能开机）
3. 主机“+”键为力度加强按键，每按一次，蜂鸣器“滴”一声，强度递增一级，力度分15档（0、1、2.....15），在力度15时再按“+”档则“嘀嘀”两声，力度不变，保持15档。
4. 主机“-”键为力度减弱按键，每按一次，蜂鸣器“滴”一声，强度递减一级，力度分15档（注：15、14、13.....1），在力度为1时再按“-”档则“嘀嘀”两声，力度不变，保持1档。
5. 主机“M”为模式键，按模式键，可切换模式。共有三个模式，每按一次，蜂鸣器“嘀”一声，模式递增一次，三个模式可循环切换（注：M1模式，M2模式，M3模式）。每切换一个模式，力度回归默认0档。
6. 遥控器“M”为模式键，按模式键，可切换模式。共有三个模式，每按一次，蜂鸣器“嘀”一声，模式递增一次，三个模式可循环切换（注：M1模式，M2模式，M3模式）。每切换一个模式，力度回归默认0档。
7. 遥控器“+”为力度加强按键，每按一次，蜂鸣器“滴”一声，强度递增一级，力度分15档（0、1、2.....15），在力度15时再按“+”档则“嘀嘀”两声，力度不变，保持15档。

8. 遥控器“-”为力度减弱按键，每按一次，蜂鸣器“滴”一声，强度递减一级，力度分15档（注：15、14、13.....1），在力度为1时再按“-”档则“滴滴”两声，力度不变，保持1档。
9. 遥控器“”为加热键，按加热键蜂鸣器“滴”一声开启主机加热功能，产品两电极片会发热，温度在37~43℃之间。
10. 遥控器“”为关闭加热键，按关闭加热键蜂鸣器“滴”一声关闭主机加热功能。
11. 主机定时15分钟，主机开机后计时15分钟后自动关机。
12. 主机开启状态下，未正常佩戴使用产品时，产品会在20秒内自动关机。

产品充电

1. 当主机缺电时主机发出“滴滴”声后等待7秒关机，可用Micro-USB线一端插入主机另一端插入电源适配器（输出为5V1A/2A）进行充电，充电时红灯，绿灯，蓝灯交替闪烁，充满时白色灯常亮。
2. 遥控器电池更换时候可用宽度适宜的钥匙插入电池旋钮槽，顺时针旋转到对位处即可打开更换电池，注意电池正极朝上。（电池型号：CR2032）

温馨提示

- 产品开机运行15分钟会自动关闭，建议每天使用不超过30分钟，每周按需使用。
- 本产品使用后应置于通风干燥处存放。
- 切勿将其它重物压在产品上面使用。
- 切勿用力拉USB充电口处的胶塞，否则容易导致断裂脱落。

日常保养

- 清洁保养本产品时，请将主机关机，使用湿纸巾清洁电极片，当特别脏时可用少许医用酒精（酒精浓度75%）对电极片进行擦拭消毒。
- 日常保养时请用中性清洁剂及柔软布擦拭，不可使用带有腐蚀性的清洁剂，不得放入水中浸泡或漂洗。
- 清洁过程中应防止水或其它液体进入机体内，以免使用时发生短路触电危险。

故障排除

- 若在使用产品时遇到问题，请参考下列几点提示及解决方式。
- 若产品仍处于故障状态或无法使用，请关掉电源。
- 使用者请勿自行拆卸或修理产品，自行拆卸或维修而导致产品损坏将造成产品保修失效，公司将不承担该情况所造成的任何后果。

故障现象	解决方法
无法启动	● 内部充电电池电量不足。 ● 遥控器电池没电。 ● 请确认主机产品开关键是否已按下。
不能充电或无充电灯显示	请检查USB连接线和主机及手机电源适配器是否连接好。
显示正常但无感觉	● 电极片是否直接接触皮肤？调整位置使其贴紧皮肤。 ● 电极片和皮肤之间是否有头发或衣物、饰品等物品？移开或去除物品。 ● 力度档位是否为0档？调节增加按摩力度。
有刺痛感	● 电极片与颈部皮肤是否贴紧？需调整位置使其紧贴皮肤。 ● 按摩时间是否太长？建议一次按15分钟，一天两次。 ● 按摩力度是否太大？可调小力度。 ● 皮肤是否对电极片过敏？严重过敏者需先进行脱敏治疗。 ● 气候寒冷、皮肤干燥？用湿毛巾湿润皮肤后使用。 ● 皮肤表面是否有伤口？不可将电极片放于伤口进行按摩。
刺激微弱	● 按摩器电极片与颈部皮肤是否紧贴？需调整位置使其贴紧皮肤并调整适当力度。 ● 电极片是否有污垢或油渍？清洁电极表面。 ● 电池是否电量不足？若电量不足请充电。 ● 按摩档位力度偏小？调节增加按摩力度。

产品及零部件回收说明

回收提示性说明

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。

产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
五金件	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
 本产品的“环保使用年限”为10年，本企业根据产品设计特性制定该期限。只有在本产品所有说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用年限”才有效。						

注：1. 以上表中未列明的，本产品中含有的其他部件及其材质均不含有害物质。

2. 以上表中含有有害物质的所有部件及其均质材料，均符合中国RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。

产品废弃时注意事项

请支持充电式电池（锂离子电池）的循环使用。

锂离子电池型号：103048-1500mAh

电池极性：电池仓内部，红线为电池正极，黑线为电池负极。

 危险	本品所用电池为专用充电式电池，不得使用于其它产品，请勿对已取出的充电式电池进行充电。 ● 请勿投入火中，使其过度受热 ● 请勿用钉子刺穿、重力冲击或进行分解改造 ● 请勿将电池正负极直接用金属连接 ● 请勿将其与项链、发卡等一起存放 ● 请勿在火炉边、烈日下等高温场所进行充电、使用和放置 ● 请勿拆开按摩器并且将内部充电锂离子电池更换为不可充电电池进行充电 以上情形均可引起发热、起火、破裂、爆炸等现象。
	请将取下的充电式电池置于婴幼儿触及不到的地方，以防止被误吞。 ● 若出现被误吞的情形时，请立即找医生诊治。 ● 当电池液泄漏时，请勿徒手接触液体，并按以下方法进行处理。 ● 当电池液体进入眼睛时，有造成失明的危险，请勿用手直接揉搓眼睛，需立即用清水洗净并立即找医生诊治，当电池液体沾在身体或衣物时，可能引起皮肤发炎或受伤，用清水冲洗，如仍有不适则需立即找医生诊治。 ● 仅限产品在废弃之时可进行分解，若不遵守，可能导致火灾、触电、受伤等事故发生，若需修理（更换电池情形除外）时，请咨询当初购买本产品的店铺。

本产品所用的锂离子电池是可回收再生的贵重资源，请在使用完毕废弃之时，将锂离子电池取出，交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。

产品保修卡

保修规定：

1. 本卡只在中国大陆地区有效（台湾、澳门、香港地区无效）。
2. 消费者为家庭生活需要使用，购买的Oseemoon按摩器产品。自产品购买之日起正常使用情况下整机保修一年。
3. 在保修期内，正常使用情况下发生故障而需要免费维修的，请持本卡和购买付款凭证联系购买渠道的电话。
4. 属下列情况之一者，不享受免费保修，但是可以实行收费修理：
 - a. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - b. 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
 - c. 无三包凭证及有效购买付款凭证的；
 - d. 三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - e. 因不可抗拒力造成损坏的。
5. 保修卡遗失不补，请妥善保管。
6. 除本保修卡规定的产品维修事宜以外，持有效保修卡的用户报修期间内同时享有国家相关法律法规规定的范围内的其他权利。

用户保修凭证

产品名称	
型 号	
产 地	
保 修 期 限	
购买凭证号	
购 机 日 期	

维修记录

送修日期	
交验日期	
故障、维修、处理情况	
维 修 单 位	
维修员签字	