

- 4) Es ist Kindern verboten, es alleine zu verwenden, um unnötigen Schaden zu vermeiden.
5) Nur die Kamera ist wasserdicht, der Griff ist NICHT, lassen Sie den Griff nicht ins Wasser fallen.
6) Um den Akku gesund zu halten, laden Sie ihn bitte mindestens einmal im Monat auf.
7) Nicht unter Sonnenschein aussetzen.
8) Die Zahnseite ist wegwerfbar.

6. Fehlerbehebung bei Dokumentationen:

- 1) Keine Antwort beim Booten.
Starten Sie die Kamera neu und überprüfen Sie, ob Strom vorhanden ist. Wenn nicht, laden Sie das Produkt bitte auf.
2) LEDs leuchten nicht?
Starten Sie die Kamera neu und stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zur APP hergestellt haben.
3) APP Flashback.
Deinstallieren Sie APP und installieren Sie es erneut, indem Sie den QR-Code scannen.
4) In der App wird eine Eingabeaufforderung für die Netzwerkverbindung angezeigt.
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her.
5) Die Betriebsanzeige blinkt?
Es bedeutet wenig Strom, bitte laden Sie die Kamera auf.
6) Nach dem Verbinden kann kein Echtzeitvideo angezeigt werden?
Bitte starten Sie die Kamera neu und verbinden Sie sie erneut mit Ihrem Smartphone.

7. Beachten:

Wenn der oben beschriebene Vorgang das Problem nicht löst, senden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir werden weitere praktikable Lösungen bereitstellen.

Manual de usuario

1. Introducción



2. Como instalarlo?

- 1) Instale hilo dental en el mainframe.



Instale hilo dental.

- 2) Escanee el código QR e instale la APLICACIÓN.



- 3) Encienda el mainframe y conecte el teléfono inteligente con WIFI(Xiao mei-XXXX).



Conectar la alimentación. Conecte el teléfono inteligente con WIFI.



- 5) Después de limpiar los dientes, apague el mainframe, desheche el hilo dental, limpie la cámara.



Soque el hilo dental y limpie la cámara con toallitas con alcohol.

3. Lista de piezas:

- 1 anfitrión.
1 cable de datos de carga
1 paquete de hilo dental de repuesto (30 piezas)
20 hisopos de algodón esterilizados con alcohol

4. Parametros del producto

Nombre del producto: Seda dental visual inteligente
Artículo No.: IVD-F-M1
Peso del anfitrión: 25 Gramos
Velocidad de transferencia de imágenes: 30fps
Temperatura de trabajo: -10-50
Batería: Li-400mAh
Tiempo de trabajo de la batería: ≈ 110 minutos
Tiempo de recarga: 1.5 horas
Corriente de entrada: DC 5V 300mA
Solución de cámara: 3MP
Recarga de energía: 5V

5. Atenciones:

- 1) No para bebés menores de 3 años.
2) Utilice toallitas con alcohol para limpiar la cámara antes de usarla.
3) Evite el impacto de la cámara.

- 4) Está prohibido que los niños lo usen solos para evitar daños innecesarios.
5) Solo la cámara es resistente al agua, el mango NO lo es, no deje caer el mango al agua.
6) Para mantener la batería en buen estado, recárguela al menos una vez al mes.
7) No exponer al sol.
8) El hilo dental es desechable.

6. Documentación de resolución de problemas:

- 1) Sin respuesta en el arranque.
Reinicie la cámara y confirme si hay energía. Si no es así, recargue el producto.
2) Los LED no se encienden?
Reinicie la cámara y asegúrese de haberse conectado a la APLICACIÓN.
3) APLICACIÓN flash back.
Desinstale la APLICACIÓN y luego vuelva a instalarla escaneando el código QR.
4) Aparece un mensaje de conexión de red en la aplicación.
Conéctese a su red.
5) La luz indicadora de encendido parpadea?
Significa baja potencia, recarga la cámara.
6) No se puede mostrar video en tiempo real después de conectarse?
Reinicie y vuelva a conectar la cámara con su teléfono inteligente.

7. darse cuenta:

Si la operación anterior no resuelve el problema, envíenos un correo electrónico y le brindaremos soluciones factibles.


Manuale d'uso

1. introduzione



2. Come installarlo?

- 1) Installa il filo interdentale nel mainframe.

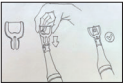

Installa il filo interdentale.

- 2) Scansiona il codice QR e installa l'APP.



- 3) Accendi il mainframe e collega lo smartphone con il WIFI(Xiao mei-XXXX).



- 4) Guarda e rileva le condizioni antigiughe orali in tempo reale tramite il telefono cellulare.



- 5) Dopo aver pulito i denti, spegnere il mainframe, smaltire il filo interdentale, pulire la fotocamera con tamponi imbevuti di alcol.



Estrarre il filo interdentale e pulire la fotocamera con tamponi imbevuti di alcol.

3. Elenco delle parti:

- 1 ospite
1 cavo dati di ricarica
1 confezione di filo interdentale di ricambio (30 pezzi)
20 pezzi di dischetti di cotone sterilizzati con alcol

4. Parametri del prodotto

Nome del prodotto: Filo Interdentale Visivo Intelligente
Oggetto numero: IVD-F-M1
Peso dell'ospite: 25 Grams
Velocità di trasferimento dell'immagine: 30fps
Temperatura di lavoro: -10-50
Batteria: Li-400mAh
Tempo di lavoro della batteria: ≈ 110 minuti
Tempo di ricarica: 1.5 ore
Corrente di ingresso: DC 5V 300mA
Soluzione fotocamera: 3MP
Ricarica il potere: 5V

5. Attenzioni:

- 1) Non per bambini sotto i 3 anni.
2) Utilizzare tamponi imbevuti di alcol per pulire la fotocamera prima di utilizzarla.
3) Evita l'impatto della fotocamera.

- 4) È vietato ai bambini usarlo da solo per evitare danni inutili.
5) Solo la fotocamera è impermeabile, la maniglia NON lo è, non lasciarla cadere nell'acqua.
6) Per mantenere la batteria in buona salute, ricaricarla almeno una volta in un mese.
7) Non esporre al sole.
8) Il filo interdentale è usa e getta.

6. Documentazione per la risoluzione dei problemi:

- 1) Nessuna risposta all'avvio.
Riavvia la fotocamera e conferma se c'è alimentazione. In caso contrario, ricaricare il prodotto.
2) L'LED non si accendeva?
Riavvia la fotocamera e assicurati di esserti connesso all'APP.
3) APP flashback.
Disinstalla APP, quindi reinstallala scansionando il codice QR.
4) Nell'app viene visualizzata una richiesta di connessione di rete.
Connettiti alla tua rete.
5) La spia dell'indicatore di alimentazione lampeggia?
Significa bassa potenza, ricaricare la fotocamera.
6) Impossibile visualizzare il video in tempo reale dopo la connessione?
Riavvia e ricollega la fotocamera al tuo smartphone.

7. Avviso:

Se l'operazione di cui sopra non risolve il problema, inviare un'e-mail, forniremo ulteriori soluzioni fattibili.

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.