


1

Welcome!

Attach your watch to the charger, and connect it to an USB outlet. Let it charge for at least 15 min.

Remove your watch from the charger and press any button to wake up the display. Select your language and your watch is ready for pairing.

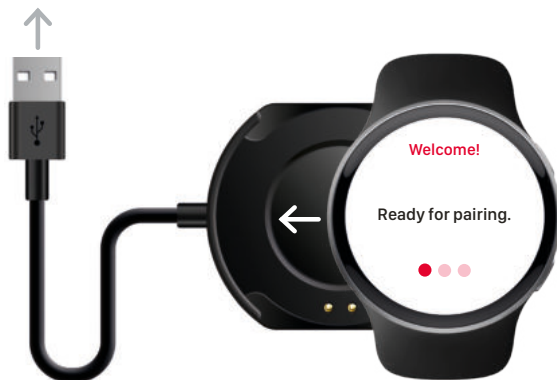

EN


BE3330 Watch Receiver

2

**Pair your watch**

- ◀ First, make sure your bridge is installed correctly. Then, hold down the top test button until the front LEDs blink alternately to initiate pairing.

A screen appears to confirm when your watch has been paired. ▶

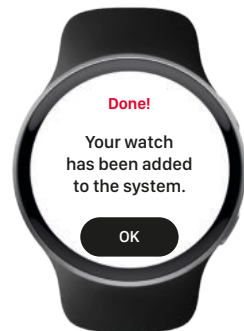

3

**Test the connection**

- ◀ Press the bridge top test button to send a signal to your watch.

A status screen confirms that your watch is connected. ▶



4

Position your watch

Wear your watch comfortably on your wrist, yet firmly enough to allow it to generate distinct vibrations.



5

Wake-up



Raise your wrist or press any of the side keys to wake up the screen.

Navigation



Tap the screen to e.g. press a button.



Watch face



Indicates the battery level.



Shows the day and date.



Displays missed notifications.

6

Home key



Press to go back to the watch face.



Press and hold to turn your watch on or off.



Back key



Press to open the menu or go back one step.



Press and hold for 3s to call for attention.

Discover all features!



BE3330_048MAN4.0

bellman.com/watch-guide



BE3330
Watch Receiver

EN

Warranty and Safety information

Before using your Watch Receiver from Bellman, please review the Watch User Guide at bellman.com/watch-guide. If you have additional questions about your product, contact your point of purchase for further assistance.

Safety and Handling

For information about safety and handling, see "Safety and Handling" in the Watch User Guide at bellman.com/watch-safety.

Exposure to Radio Frequency

For radio frequency exposure information, see "Exposure to radio frequency energy" in the Bellman Watch User Guide at bellman.com/watch-safety.

Battery and Charging

For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized service center for assistance. Batteries must be recycled or disposed of separately from household waste. For information about battery disposal and recycling, see "Correct disposal of batteries in this product" in the Watch User Guide at bellman.com/watch-guide.

Medical Device Interference

Persons with pacemakers should:

- ALWAYS keep the product more than six (6) inches, (15 cm), from their pacemaker when the product is turned ON.
- Not carry the product in a breast pocket.
- Use the wrist opposite the pacemaker to minimize the potential for Radio frequency (RF) interference.

- Turn the product OFF immediately if there is any indication that interference is taking place.
- If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.

Two-Year Limited Warranty Summary

The company guarantees this product for two (2) years from date of purchase against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This guarantee only applies to normal conditions of use and service, and does not include damage resulting from accident, neglect, misuse, unauthorized dismantling, or contamination howsoever caused.

This guarantee excludes incidental and consequential damage. Furthermore, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary with territory. Some countries or jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. The above warranty may not be altered except in writing signed by both parties hereto.

For Australian Consumers

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Cleaning

Wipe your watch clean with a nonabrasive, lint-free cloth. If necessary, lightly dampen the cloth with fresh water. If your watch has substances or debris visible in places such as the charging ports, you can hold it under lightly running, warm, fresh water until it's clean. This device does not require sterilization.

Service and Support

If the device appears to be damaged or doesn't function properly, follow the instructions in the Watch User Guide at bellman.com/watch-guide. If the product still doesn't function, contact an authorized service center for information on service and warranty.

Regulatory

For regulatory certification information, see the Bellman Watch User Guide at bellman.com/watch-safety.

Technical Specifications

Dimensions	49.5 × 44.5 × 10.2 mm, Weight: 42g, 1.5 oz.
Screen Size	1.3" TFT full touch screen
Screen Resolution	240 × 240 px
Battery Power	200 mAh
Operating time	Up to 1 week depending on use
Material	ABS + PC (watch), Silicone (wrist band)
Waterproof	IP67
Charger	USB charger
Bluetooth Freq.	2400 – 2483.5 MHz, Max transmission power: 3 mW
Coverage	Up to 250 m open range. Obstacles, such as walls, bodies or electrical equipment can reduce the Bluetooth coverage significantly.

In the box

- BE3330 Watch Receiver
- BE9295 Pocket Charger
- BE9419 Wrist Band, Black
- Getting Started Guide

Bellman.

BE3330
Receptor de Reloj

ES

Garantía e información de seguridad

Antes de utilizar su receptor de pulsera de Bellman, por favor revise el Ve a la Guía del usuario en bellman.com/watch-guide. Si tiene más preguntas sobre su producto, póngase en contacto con su punto de venta para obtener más ayuda.

Seguridad y manipulación

Para obtener información sobre seguridad y manipulación, consulte "Seguridad y manipulación" en la Guía del usuario del reloj en bellman.com/watch-safety.

Exposición a radiofrecuencias

Para obtener información sobre la exposición a radiofrecuencias, consulte "Exposición a energía de radiofrecuencia" en la Guía del usuario del reloj Bellman en bellman.com/watch-safety.

Batería y carga

Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada al producto. La sustitución de la batería por un profesional no cualificado puede causar daños a su dispositivo. Si necesita sustituir la batería, llévela al centro de servicio autorizado más cercano para que le ayuden. Las pilas deben reciclarse o por separado de los residuos domésticos. Para obtener información sobre la eliminación y el reciclaje de pilas, consulte "Eliminación correcta de las pilas de este" en la Guía del usuario del reloj en bellman.com/watch-guide.

Interferencias de productos sanitarios

Las personas con marcapasos deben:

- Mantenga SIEMPRE el producto a más de seis (6) pulgadas, (15 cm), de su marcapasos cuando el producto esté ENCENDIDO.
- No llevar el producto en el bolsillo del pecho.
- Utilice la muñeca opuesta al marcapasos para minimizar las

posibles interferencias de radiofrecuencia (RF).

- Apague el producto inmediatamente si hay algún indicio de que se están produciendo interferencias.
- Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte a su médico o al fabricante de su dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido de la energía de radiofrecuencia externa.

Resumen de la garantía limitada de dos años

La empresa garantiza este producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto que se deba a materiales o mano de obra defectuosos. Esta garantía sólo se aplica a las condiciones normales de uso y servicio, y no incluye los daños resultantes de accidente, negligencia, uso indebido, desmontaje no autorizado o contaminación, cualquiera que sea su causa.

Esta garantía excluye los daños incidentales y consecuentes. Además, la garantía no cubre casos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían según el territorio. Algunos países o jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que el la limitación anterior puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía es adicional a sus derechos legales como consumidor. La garantía anterior no podrá modificarse salvo por escrito firmado por ambas partes.

Limpieza

Limpie el reloj con un paño no abrasivo que no suelte pelusa. Si es necesario, humedezca ligeramente el paño con agua dulce. Si su reloj tiene sustancias o residuos visibles en lugares como los puertos de carga, puede mantenerlo bajo un chorro ligero de agua dulce tibia hasta que esté limpio. Este dispositivo no requiere esterilización.

Servicio y asistencia

Si el dispositivo parece estar dañado o no funciona correctamente, siga las instrucciones de la Guía del usuario del reloj en bellman.com/watch-guide. Si el producto sigue sin funcionar, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para obtener información sobre el servicio y la garantía.

Normativa

Para obtener información sobre la certificación reglamentaria, consulte la Guía del usuario del reloj Bellman en bellman.com/watch-safety.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	49.5 × 44.5 × 10.2 mm, Peso: 42g, 1.5 oz.
Tamaño de la pantalla	1,3" TFT pantalla táctil completa
Resolución de pantalla	240 × 240 px
Potencia de la batería	200 mAh
Tiempo de funcionamiento	Hasta 1 semana dependiendo del uso
Material	ABS+PC (reloj), Silicona (pulsera)
Resistente al agua	IP67
Cargador	USB
Frecuencia	2400 – 2483,5 MHz
Potencia de transmisión	3 mW (máx.)
Cobertura	≤ 250 m de alcance abierto. Los obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, pueden reducir la cobertura.

En la caja

- BE3330 Receptor de Reloj
- BE9295 Cargador de bolsillo
- BE9419 Muñequera, Negro
- Guía de iniciación

Bellman.

BE3330
Récepteur de Montre

FR

Garantie et informations de sécurité

Avant d'utiliser votre récepteur de montre Bellman, veuillez prendre connaissance des informations suivantes. Regardez le guide de l'utilisateur sur bellman.com/watch-guide. Si vous avez d'autres questions sur votre produit, contactez votre point de vente pour obtenir de l'aide.

Sécurité et manipulation

Pour plus d'informations sur la sécurité et la manipulation, voir "Sécurité et manipulation" dans le Guide de l'utilisateur de la montre à l'adresse bellman.com/watch-safety.

Exposition aux radiofréquences

Pour plus d'informations sur l'exposition aux radiofréquences, voir «Exposition à l'énergie des radiofréquences» dans le guide de l'utilisateur de la montre Bellman à l'adresse bellman.com/watch-safety.

Batterie et charge

Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée dans le produit. Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut entraîner des dommages à votre appareil. Si vous devez remplacer la batterie, apportez-la au centre de service agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. Les piles doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage des piles, consultez la section "Mise au rebut correcte des piles de ce produit" du guide de l'utilisateur de la montre à l'adresse bellman.com/watch-guide.

Interférence des dispositifs médicaux

Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque doivent :

- Gardez TOUJOURS le produit à plus de 15 cm de votre stimulateur cardiaque lorsque le produit est allumé.
- Ne pas transporter le produit dans une poche de poitrine.

- Utilisez le poignet opposé au stimulateur cardiaque afin de minimiser le risque d'interférence des radiofréquences (RF).
- Éteindre immédiatement le produit s'il y a une quelconque indication d'interférence. Si vous utilisez un autre appareil médical personnel, consultez votre médecin ou le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie RF externe.

Résumé de la garantie limitée de deux ans

La société garantit ce produit pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat contre tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions normales d'utilisation et de service, et n'inclut pas les dommages résultant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage non autorisé ou d'une contamination, quelle qu'en soit la cause.

Cette garantie exclut les dommages accessoires et indirects. En outre, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient en fonction du territoire. Certains pays ou juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur. La garantie ci-dessus ne peut être modifiée que par un écrit signé par les deux parties.

Nettoyage

Nettoyez votre montre avec un chiffon non abrasif et non pelucheux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau douce. Si des substances ou des débris sont visibles dans des endroits tels que les ports de charge, vous pouvez passer la montre sous un filet d'eau douce tiède jusqu'à ce qu'elle soit propre. Cet appareil ne nécessite pas de stérilisation.

Service et assistance

Si l'appareil semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement, suivez les instructions du guide de l'utilisateur de la montre. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez un centre de service agréé pour obtenir des informations sur le service et la garantie.

Réglementation

Pour obtenir des informations sur les certifications réglementaires, consultez le guide de l'utilisateur de la montre.

Spécifications techniques

Dimensions	49.5 × 44.5 × 10.2 mm, Poids : 42 g, 1.5 oz.
Taille de l'écran	1.3" TFT entièrement tactile
Résolution de l'écran	240 × 240 px
Puissance de la batterie	200 mAh
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 1 semaine selon
l'utilisation matériau	ABS + PC (montre), Silicone (bracelet)
Étanchéité	IP67
Chargeur	USB
Fréquence Bluetooth	2400 – 2483.5 MHz
Puissance de transmission	3 mW (max)
Couverture	Jusqu'à 250 m de portée. Les obstacles, tels que les murs ou les équipements électriques, peuvent réduire la couverture Bluetooth.

Dans la boîte

- BE3330 Récepteur de Montre
- BE9295 Chargeur de poche
- BE9419 Bracelet, noir
- Guide de démarrage

EN FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning

Changes or modifications to this unit not expressly approved by Bellman & Symfon Group AB could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC compliance statement

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Product disposal and recycling information

According to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The recycling of your product will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Battery disposal information

This product contains batteries that according to local laws and regulations must be disposed of separately from household waste. Take used batteries to a collection point designated by the authorities.

FCC ID: 2APAKBE3330

IC: 6693A-BE3330



Manufacturer

Head Office

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim
Sweden
Phone: +46 31 68 28 20
E-mail: info@bellman.com

Distributor | Distribuidor | Distributeur

USA & Canada

Bellman & Symfon North America Inc.
PO Box 1388, Morrisville
North Carolina 27560, USA
Phone: (910) 239-5796
Customer support: (833) BELLMAN
or (833) 235-5626

Australia & New Zealand

Word of Mouth Technology
PO Box 1001
Croydon VIC 3136
Australia
Phone: 03 9723 0660
Email: info@wom.com.au



© and TM 2025 Bellman & Symfon AB. All rights reserved. Revision: BE3330_047WCD4.0. Date of issue: 2025-02-25