


Smart ear checker N20

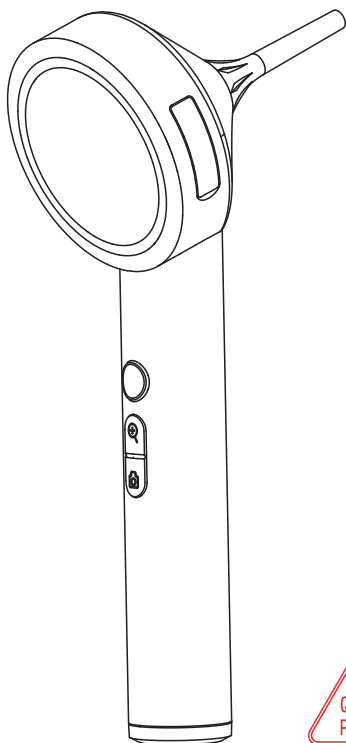

Multilingual user manual

Catalogue

1、中 文	2
2、English	4
3、Français	5
4、Deutsch	6
5、Italiano	10
6、Español	12
7、日本語	14
8、한국어	16
9、Русский язык	18

 使用前请仔细阅读说明书

一、本产品能帮你做什么？



1.检查耳朵



2.检查鼻腔




3.检查牙齿



4.检查皮肤

二、产品功能介绍

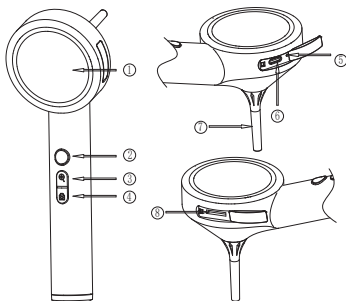

- 1、1.8 寸全视角显示屏，分辨率 360(H)RGB x360(V)
- 2、电源键，按 2 秒开关机，短按调节灯光亮度。
- 3、缩放键，短按放大图像，长按进入相册，在相册预览界面短按向上翻页，在图像删除界面切换选项。
- 4、拍照键，短按拍照，长按进入\退出录制视频，在相册预览界面短按向下翻页，长按进入删除界面并确认删除照片或退出删除界面。
- 5、复位按键孔。
- 6、Type-C 充电接口。
- 7、摄像头模组
- 8、T-Flash 卡槽

三、配件的使用



- 1、请根据需求选择保护罩。
- 2、更换安装保护罩注意要装到位、底部与主机吻合。

四、技术参数

圆屏尺寸：1.8 英寸

摄像头像素： HD 1080P

最佳焦距：15mm

景 深：5mm-30mm

镜头尺寸：3.5mm

摄像头外 径：3.98mm

电池容量：2000mAh

连续使用：约 8.5 小时

充电时间：约 3 小时

 Please read the instruction manual carefully before use

A.What can this product do for you?



1. Check the ears



2. Check the nasal cavity




3. Check the teeth



4. Check the skin

B. Product function introduction

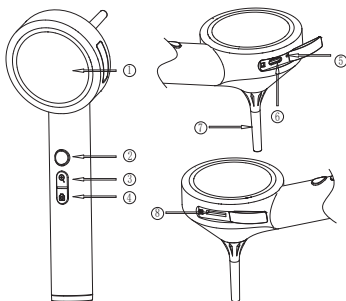

1. 1.8-inch full view display screen, resolution 360 (H) RGB x360 (V)


2. Power button, long press for 2 seconds to turn on/off, short press to adjust light brightness.

3. Zoom key, short press to enlarge the image, long press to enter the album, short press "Previous", short press to switch options on the image deletion interface.

4. Take a photo button, short press to take a photo, long press to enter/exit the recorded video, short press "Next" on the album preview interface, long press to enter the delete interface and confirm to delete the photo or exit the delete interface.

5. Reset button hole.
6. Type-C charging interface.
7. Camera module
8. T-Flash card slot

C、 Use of accessories

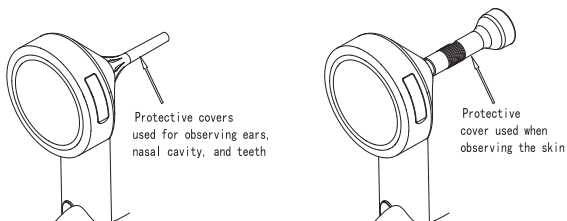

1. Please choose a protective cover according to your needs.
2. When replacing and installing the protective cover, pay attention to installing it in place and aligning the bottom with the main unit.

D、 Technical Parameter

Round screen size: 1.8 inches

Camera pixel: HD 1080P

Best focal length: 15mm

Depth of field: 5mm-30mm

Lens size: 3.5mm

Camera outer diameter: 3.98mm

Battery capacity: 2000mAh

Continuous use: approximately 8.5 hours

Charging time: about 3 hours

 Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation

A.Qu' est-ce que ce produit peut faire pour vous ?



1. Vérifiez vos oreilles



2. Vérifiez la cavité nasale




3. Vérifiez vos dents



4. Vérifiez la peau

B. Présentation de la fonction du produit

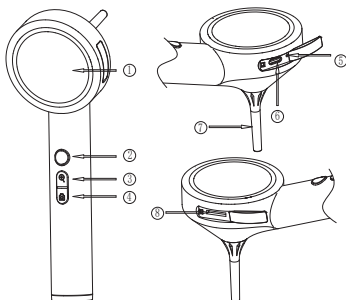

1, 1,8 pouces plein angle d'affichage avec résolution 360 (h) RGB X360 (v)

2, touche d'alimentation, appuyez longuement sur 2 secondes on \ off, appuyez brièvement pour ajuster la luminosité de la lumière.

3, zoom, appuyez brièvement pour agrandir l'image, appuyez longuement pour entrer dans l'album, appuyez brièvement sur "page précédente", dans l'interface de suppression d'image appuyez brièvement sur l'option basculer.

4, touche de photo, appuyez brièvement pour prendre une photo, appuyez longuement pour entrer ou sortir de l'interface d'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur "page suivante" dans l'interface d'aperçu de l'album, appuyez

longuement pour entrer dans l'interface de suppression et confirmer la suppression de la photo ou quitter l'interface de suppression.


5, réinitialiser le trou de touche.

6, interface de charge de type - C.

7, module de caméra

8, emplacement pour carte t - flash

C、 Utilisation des accessoires

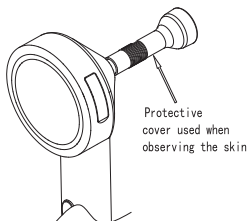

1. Veuillez choisir une housse de protection en fonction de vos besoins.

2. Remplacez le couvercle de protection, faites attention à l' assemblage et il n' y a pas d' espace entre le bas et la machine principale.

D、 Paramètres techniques

Taille de l'écran rond: 1,8 pouces

Pixels de l'appareil photo: HD 1080p

Meilleure longueur focale: 15mm

Profondeur de champ: 5mm - 30mm

Taille de l'objectif: 3,5 mm

Diamètre extérieur de la caméra: 3.98mm

Capacité de la batterie: 2000 mAh

Utilisation continue: environ 8,5 heures

Temps de charge: environ 3 heures



Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anleitung sorgfältig.

A. Was kann dieses Produkt für Sie tun?



1. Überprüfen Sie Ihre Ohren



2. Überprüfen Sie die Nasenhöhle




3. Überprüfen Sie Ihre Zähne



4. Überprüfen Sie die Haut

B. Einführung in die Produktfunktion

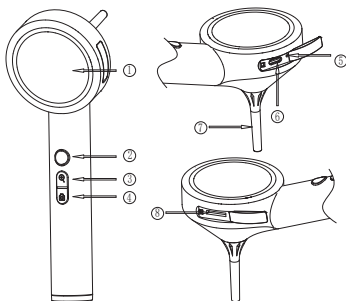

1, 1,8 Zoll Vollbildschirm mit Auflösung 360 (H) RGB x 360 (V)

2, Power-Taste, lang drücken Sie 2 Sekunden ein / ausschalten, kurzdrücken Sie die Lichthelle einstellen.

3, Zoom-Taste, kurzdrücken Sie das Bild zu vergrößern, lang drücken Sie auf das Album, kurzdrücken Sie auf "Vorherige Seite", kurzdrücken Sie auf die Bildlöschungsoberfläche, um die Optionen zu wechseln.

4, Foto-Taste, kurzdrücken Sie Foto, lange Klick, um die Aufzeichnungs-Videooberfläche einzugehen oder zu verlassen, kurzdrücken Sie "Nächste" in der Albumverschauoberfläche, lange Klick, um die Löschoberfläche

einzugehen und bestätigen Sie, dass das Foto gelöscht oder die Löschoberfläche beendet wird.


5. Das Tastenloch zurücksetzen.

Typ-C Ladeschnittstelle.

7. Kameramodule

8. T-Flash-Kartenschlitz

C. Verwendung von Zubehör

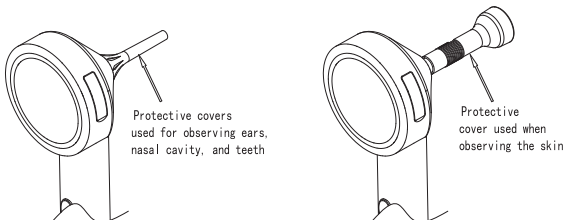

1. Bitte wählen Sie eine Schutzhülle entsprechend Ihren Bedürfnissen.

2. Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an und achten Sie auf die Montage. Es gibt keinen Spalt zwischen der Schutzabdeckung und dem Hauptgerät.

D. Technische Parameter

Rundbildgröße: 1,8 Zoll

Kamerapixel: HD 1080P

Beste Brennweite: 15 mm

Sichttiefe: 5mm-30mm

Objektivgröße: 3,5 mm

Außendurchmesser der Kamera: 3,98 mm

Batteriekapazität: 2000 mAh

Dauerhafter Gebrauch: ca. 8,5 Stunden

Ladezeit: ca. 3 Stunden

 Leggi attentamente le istruzioni prima di usarle.

A. Cosa può fare questo prodotto per te?



1. Controlla le tue orecchie



2. Controllare la cavità nasale




3. Controlla i tuoi denti



4. Controlla la pelle

B. Introduzione alla funzione del prodotto

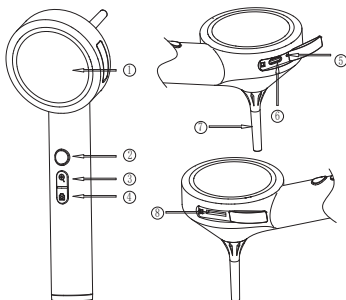

1, 1,8 pollici full-angle display, risoluzione 360 (H) RGB x360 (V)

2, il tasto di alimentazione, premere a lungo 2 secondi per accendere / spegnere la macchina, premere a breve per regolare la luminosità della luce.

3, il tasto di ingrandimento, premere per ingrandire l'immagine, premere lungo per accedere all'album, premere "Pagina precedente", premere l'opzione di commutazione nell'interfaccia di eliminazione dell'immagine.

4, il tasto di scattare foto, premere breve per scattare foto, premere lungo per entrare o uscire dall'interfaccia di registrazione video, premere breve per "Pagina successiva" nell'interfaccia di anteprima dell'album, premere lungo per entrare

nell'interfaccia di cancellazione e confermare la cancellazione della foto o uscire dall'interfaccia di cancellazione.


5, ripristinare il foro del tasto.

Interfaccia di ricarica Type-C.

7 Modulo della telecamera

Slot per schede T-Flash

C. Utilizzo degli accessori

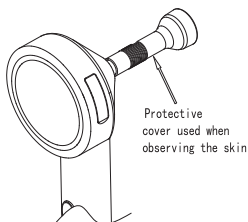

1. Si prega di scegliere una copertura protettiva in base alle proprie esigenze.
2. Sostituire le parti in silicone e prestare attenzione all'installazione. Non dovrebbe esserci spazio tra le parti in silicone e la macchina principale.

D. Parametri tecnici

Dimensioni dello schermo rotondo: 1,8 pollici

Pixel della fotocamera: HD 1080P

Distanza focale ottimale: 15 mm

Profondità di campo: 5mm-30mm

Dimensioni dell'obiettivo: 3.5mm

Diametro esterno della fotocamera: 3,98 mm

Capacità della batteria: 2000 mAh

Utilizzo continuo: circa 8,5 ore

Tempo di ricarica: circa 3 ore



Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlos.

A. Qué puede hacer este producto por usted?



1. Revisa tus oídos



2. Revisa la cavidad nasal




3. Revisa tus dientes



4. Revisa la piel

B. Introducción de la función del producto

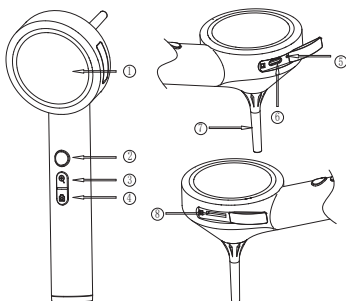

1. pantalla de perspectiva completa de 1,8 pulgadas, resolución 360 (h) RGB X360 (v)
2. botón de encendido, presione durante 2 segundos para encender y apagar, y presione brevemente para ajustar el brillo de la luz.
3. Presione el botón de zoom, presione brevemente para ampliar la imagen, presione largo para entrar en el álbum, presione corto "página anterior" y presione brevemente la opción de conmutación en la interfaz de eliminación de imagen.
4. haga clic en el botón de tomar fotos, presione brevemente para tomar fotos, presione largo para entrar o salir de la interfaz de grabación de video, presione "siguiente página" en la interfaz de previsualización del álbum, presione largo para

entrar en la interfaz de eliminación y confirme la eliminación de fotos o salga de la interfaz de eliminación.



5. restaurar el agujero de la tecla.

6. interfaz de carga tipo - C.

7. módulo de cámara

8. ranura de la tarjeta T - flash

C、 Uso de accesorios

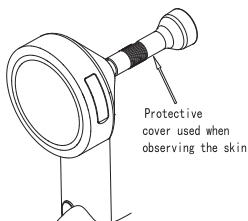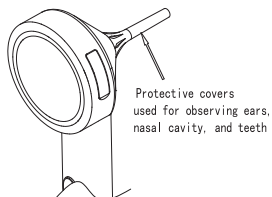

1. Elija una cubierta protectora de acuerdo con sus necesidades.

2. Vuelva a colocar la cubierta protectora y preste atención a la instalación. No debe haber espacio entre la cubierta protectora y la unidad principal.

D、 Parámetros técnicos

Tamaño de la pantalla redonda: 1,8 pulgadas

Píxeles de la cámara: HD 1080p

Distancia focal óptima: 15 mm

Profundidad del campo: 5 mm - 30 mm

Tamaño de la lente: 3,5 mm

Diámetro exterior de la cámara: 3,98 mm

Capacidad de la batería: 2.000 mAh

Uso continuo: aproximadamente 8,5 horas

Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

 ご使用前に取扱説明書をよくお読みください

A. この製品はあなたに何ができますか？



1. 耳の検査



2. 鼻腔の検査




3. 歯の検査



4. 肌の検査

B. 製品機能の紹介

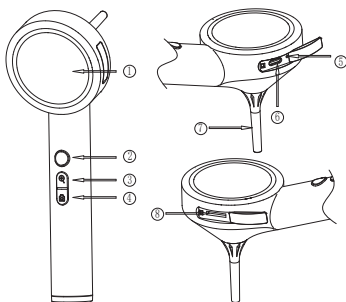


1. 1.8 インチ全視野角ディスプレイ、解像度 360 (H) RGB x 360 (V)
2. 電源ボタン、長押し 2 秒でオン/オフし、短押しで照明の明るさを調節する。
3. ズームキー、短押しで画像を拡大し、長押しでアルバムに入り、短押しで「前のページ」を押し、画像削除インターフェースで短押しでオプションを切り替える。
4. 撮影ボタン、短く押して写真を撮り、長く押してビデオインターフェースを録画または終了し、アルバムプレビューインターフェースで「次ページ」を短く押し、長く押して削除インターフェースに入り、写真の削除または削除インターフェースを終了することを確認する。
5. キー穴をリセットします。
6. Type-C 充電コネクタ。

7、カメラモジュール

8、T-Flash カードスロット

C、部品の使用

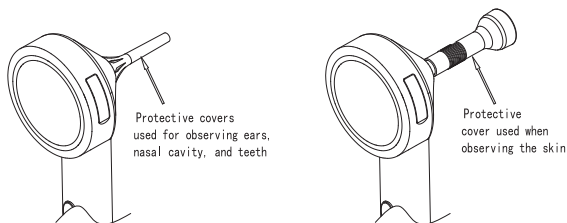

1、使用の要求に応じて保護カバーを選択してください。

2、保護カバーを交換する際は、正しく取り付けることに注意してください。保護カバーと本体の接合部分に隙間がないようにしてください。

D、技術パラメータ

スクリーンサイズ: 1.8 インチ

カメラ画素: HD 1080 P

最適焦点距離: 15 mm

被写界深度: 5 mm-30 mm

レンズサイズ: 3.5 mm

カメラ外径: 3.98 mm

バッテリー容量: 2000 mAh

連続使用: 約 8.5 時間

充電時間: 約 3 時間

 용하기 전에 설명서를 자세히 읽어 주십시오.

A. 본 제품은 무엇을 도와 드릴까요?



1. 귀 검사



2. 비강 검사




3. 치아 검사



4. 피부 검사

B. 제품 기능 소개

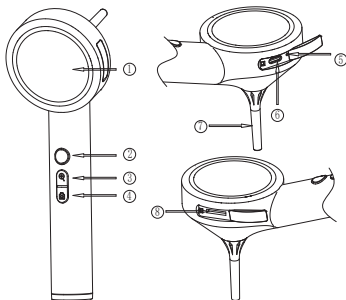

1.8 인치 풀 비전 디스플레이, 해상도 360(H) RGB x360(V)

2. 전원 키, 2 초 동안 길게 누르면 켜고 \ 끄고, 짧게 누르면 조명의 밝기를 조절한다.

3. 확대 / 축소 키, 확대 이미지를 짧게 누르고, 앨범을 길게 누르고, "이전"을 짧게 누르고, 이미지 삭제 인터페이스에서 전환 옵션을 짧게 누릅니다.

4. 사진 촬영 키, 짧은 버튼으로 사진 촬영, 긴 버튼으로 녹화 영상 인터페이스에 들어가거나 종료, 앨범 미리 보기 인터페이스에서 "다음"을 짧게 누르고, 긴 버튼으로 삭제 인터페이스에 들어가서 사진 삭제를 확인하거나 삭제 인터페이스를 종료한다.


5. 키 구멍을 재설정합니다.

6. Type-C 충전 인터페이스.

7, 카메라 모듈

8, T-Flash 카드 슬롯

C. 부품 사용

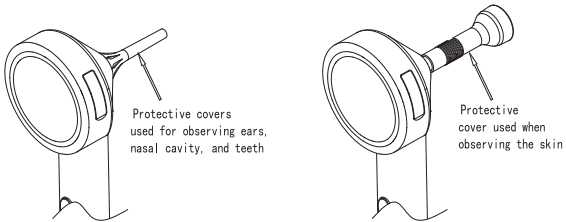

1. 필요에 따라 보호 커버를 선택하십시오.
2. 보호 커버를 교체하고 설치에 주의하십시오. 보호 커버와 본체 사이에 틈이 없어야 합니다.

D. 기술적인 모수

원형 화면 크기 : 1.8 인치

카메라 픽셀 : HD 1080P

최적 초점 거리: 15mm

피사계 심도: 5mm-30mm

렌즈 크기 : 3.5mm

카메라 직경 : 3.98mm

배터리 용량 : 2000 mAh

연속 사용 : 약 8.5 시간

충전 시간 : 약 3 시간

 Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

А. ем этот продукт может помочь вам?



1. Проверьте уши



2. Осмотр носовой полости




3. Проверьте зубы



4. Проверьте кожу

В. Введение в функцию продукта

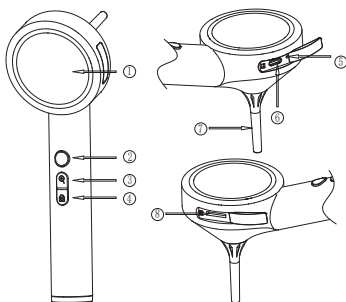

1, 1,8 - дюймовый полноугольный дисплей с разрешением 360 (H) RGB x360 (V)

2, клавиша питания, нажмите 2 секунды, чтобы включить \ выключить, короткий нажмите, чтобы регулировать яркость

света.

3. Клавиша масштабирования, короткий нажатие на увеличенное изображение, длинный нажатие на вход в фотоальбом, короткий нажатие на "предыдущую страницу", короткий нажатие на опцию переключения в интерфейсе удаления изображения.

4. Клавиша фотографирования, короткий нажатие для фотографирования, длинный нажатие для входа или выхода из видео - интерфейса записи, короткий нажатие « Следующая страница» в интерфейсе предварительного просмотра альбома, длинный нажатие для входа в интерфейс удаления и подтверждения удаления фотографии или выхода из интерфейса удаления.


5. Сбросить отверстие для клавиш.

Интерфейс зарядки Type - C.

7 Модуль камеры

8, T - Flash Карточный слот

С. Использование запасных частей

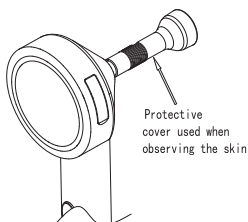

1. Пожалуйста, выберите защитный чехол в соответствии с вашими потребностями.

2. Установите на место защитный кожух и обратите внимание на установку. Между защитным кожухом и основным блоком не должно быть зазора.

D. Технические параметры

Размер круглого экрана: 1,8 дюйма

Пиксели камеры: HD 1080P

Оптимальное фокусное расстояние: 15 мм

Глубина резкости: 5-30 мм

Размер объектива: 3,5 мм

Диаметр камеры: 3,98 мм

Емкость аккумулятора: 2000 mAh

Непрерывное использование: около 8,5 часов

Время зарядки: около 3 часов

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Workin voltage:4.2V

Rated power:2.5W

Input parameters:5V = 0.4A

Executrve standards:GB4943.1-2011