



EveLab Insight – Eve V Skin Imaging Analysis System
User Guide


Contents

Product Introduction	2
Packing List	2
Parts List	3
Device Status	3
Manual	4
Safety Precautions	6
Warranty/Repair	7
Warranty Card	7
Specifications	8
Japanese Version	9
Korean Version	17


Product Introduction

The EveLab Insight – Eve V Skin Imaging Analysis System is a professional skin analysis device developed by EveLab Insight. It provides an accurate, safe, and personalized skin analysis experience for each user.

Packing List

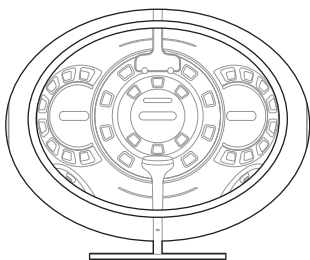

Main device: 1 Unit

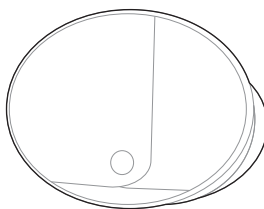

Lens hood: 1 Piece



Calibration plate: 1 Piece



Tablet base: 1 Piece

Power adapter: 1 Piece


Hand screw: 8 Pieces (6 screws used to install the lens hood, 2 screws for spare.)

User guide: 1 Copy

Please use the original accessories.

Official website: www.evelabinsight.com

Parts List

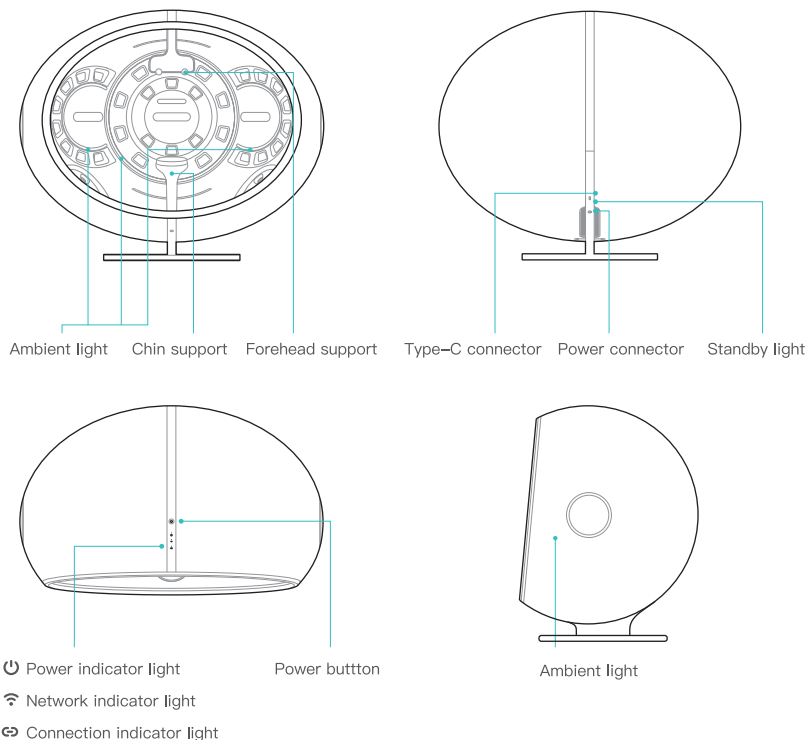

Device Status

Power connected: The red standby light on the back of the device should always be on.

Starting up: The power indicator light flashes.

Device powered on: The power indicator light is always on.

Network to be connected: The network indicator light flashes.

Network is connected: The network indicator light is always on.

Tablet to be connected: The connection indicator light flashes.


Tablet is connected: The connection indicator is always on.

Power off: All indicator lights on the top should be off.

Manual


I. Unboxing Guide

1. Take out the device: Place the device on the desktop according to the instructions on the box. **(Please do not grasp forehead support or chin support and do not touch the color card on the back of the forehead support).**
2. Install the lens hood: Take out the lens hood from the box and take out 6 hand screws from the accessory box. Remove the 6 screw hole plugs from the device as shown in the diagram and use hand screws to install lens hood onto the main device. The logo on the front of the lens hood should be parallel to the desktop.
3. Connect to the power supply: Connect the power cord to the back of the device. You are now ready to use your device.

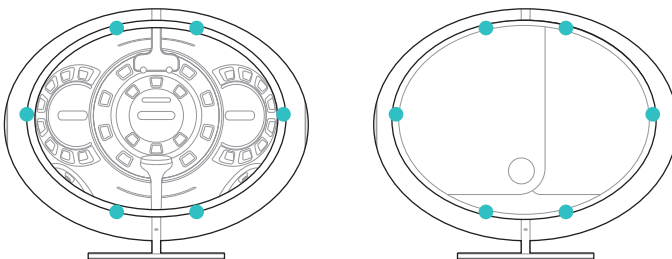

II. Power and Connection

1. Power on: Short-press the power button on the top of the device. The power indicator light is at the top of the device. You should hear a beep, indicating that the device is in the power-on state, and the power indicator light should be always on, indicating that the power-on process is completed.
2. Download: Open the App Store on your tablet and search for the app “EveLab Insight – Eve V”. Download and install it.
3. Log in: Open the app and log in with the store account and password.
4. Connect: Place the tablet close to the device and connect according to the prompts from the software interface.

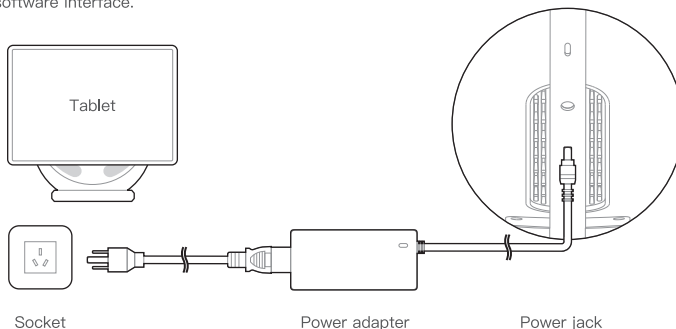

III. Take Photos and Analyze Skin

1. Create profile: Create a profile for customers according to the prompts in the software interface.
2. Clean: Wipe the front of the forehead support and chin support with a cotton alcohol pad. **(Do not let alcohol or other liquids touch the color card on the back of the forehead support)**
3. Prepare to take photos: After the customer cleans their face, make sure their face is not blocked by bangs, jewelry, glasses, or any other items. Then, have the customer sit in front of the device with their chin resting on the chin support and forehead resting on the forehead support, making sure their head is straight and eyes are closed. The operator should then cover the customer's head with the lens hood and ensure only the customer's face is displayed on the screen before taking photos.
4. Take photos and analyze skin: The operator conducts the skin detection according to the prompts in the software interface.
5. Explain the report: After the skin detection is completed, the operator can show and explain the skin analysis report to the customer via your tablet.
6. Power off: Short press the top power button to power off.

IV. Maintenance Instructions

1. Before each detection, the operator needs to use a cotton alcohol pad to wipe the front of the forehead support and chin support to ensure the cleanliness of the device for each customer.
2. The casing for the device is made from environmentally-friendly materials. If it needs cleaned, please wipe it with an alcohol pad.
***Note: Do not touch the lens and the color card on the back of the forehead support with fingers, alcohol pad, etc.**
3. Please keep the detection camera and luminaire clean. Otherwise, the performance of the product may be adversely affected.
4. If the accuracy of the device is abnormal, the calibration board can be used to assist in repairing. For specific usage, please refer to the instructions by scanning the QR code below.

Scan the following code to learn more.



Scan the following code to download
Eve V App from the App Store.





USER GUIDE

You can write down your store account and password in case you forget it.

Account: _____

Password: _____

01 CREATE PROFILE

Create a profile for customers according to the prompts in the software interface.

02 CLEAN

Wipe the front of the forehead support and chin support with a cotton alcohol pad. (Do not let alcohol or other liquids touch the color card on the back of the forehead support)

03 PREPARE

After the customer cleans their face, make sure their face is not blocked by bangs, jewelry, glasses, or any other items. Then, have the customer sit in front of the device with their chin resting on the chin support and forehead resting on the forehead support, making sure their head is straight and eyes are closed. The operator should then cover the customer's head with the lens hood and ensure only the customer's face is displayed on the screen before taking photos.

04 TAKE PHOTOS

The operator conducts the skin detection according to the prompts in the software interface.

05 EXPLAIN THE REPORT

After the skin detection is completed, the operator can show and explain the skin analysis report to the customer via your tablet.

Scan the following code to learn more.



Scan the following code to download Eve V App from the App Store.



Please tear off and keep this page.

Safety Precautions

The precautions herein are to ensure proper use of the device and prevent personal injury and property damage to users and others. Please strictly follow the precautions.

- 1 .Only use the original Eve V power adapter with this product. Otherwise, power related problems or damage to the device may occur;
- 2 .During use, keep the power plug securely attached to the power outlet and make sure it is easily accessible to plug and unplug;
- 3 .If the power adapter is used incorrectly, the power cord may break. Do not use the device if the power cord is twisted and cannot be restored, or if the power cord or the power connector is damaged, deformed or broken;
- 4 .When the device is not in use for long period of time, store the device in a dry, dark, cool place and avoid contact with hard objects so as not to damage the product;
- 5 .Do not store the product and its accessories in a humid environment for a long period of time. Otherwise, the performance of the product may be adversely affected;
- 6 .Please keep this device away from any heat sources or open flames;
- 7 .Do not immerse the device in water or rinse with water;
- 8 .Please store the device in a place that is out of reach of children;
- 9 .Do not disassemble, repair, or rebuild this device without authorization
- 10 .Do not unplug the power cord while the power is on.
- 11 .This product is a precision instrument, please do not rough handling, vibration, knocking this product, so as not to cause damage.

Warranty/Repair

I. Starting from the date of purchase, a one-year warranty service is provided upon presentation of invoice, receipt, and warranty card. During the warranty period, if any issues with the device arise as a result of product quality, you will be entitled to free repair and maintenance services.

II. The following conditions are not covered in the scope of warranty:

- 1 . Products not purchased from official channel;
- 2 . Warranty period exceeded;
- 3 . Damage caused by unauthorized dismantling or repair;
- 4 . Burning of the circuit board due to human fault, such as immersion in liquid or dropping;
- 5 . Damage caused by improper installation, use, maintenance or storage;
- 6 . Warranty certificate not in conformity with product model or warranty certificate being altered;
- 7 . Damage caused by force majeure.

Warranty Card

S/N		
Customer	Name	
	Phone Number	
	Address	
	Invoice Number	
	Purchase Date	
Dealership/Entity	Name	
	Phone Number	
	Address	

Specifications

Brand name: EveLab Insight

Product name: EveLab Insight – Eve V Skin Imaging Analysis System

Product model: MS20A15

Color: Aurora white

Material: PC / silicone / metal

Operating temperature: 0°C – 40°C

Overall machine size: 642mm*400mm*530mm

Rated voltage: 12V

Execution standards: GB4706.1–2005, GB4706.15–2008


目次

製品のご紹介	10
同梱物リスト	10
パーツリスト	11
デバイス状態表示	11
マニュアル	12
安全上のご注意	14
保証/修理	15
保証書	15
仕様書	16
English Version	1
Korean Version	17


製品のご紹介

Eve V皮膚画像分析システムは、3Dパノラマ人工知能肌測定機器です。5つの構造化光カメラを搭載して、わずか数秒で、皮膚の真皮層の奥深くまで視覚化して、35以上の状態の詳細なパーソナライズされたスキンレポートを生成できます。

同梱物リスト

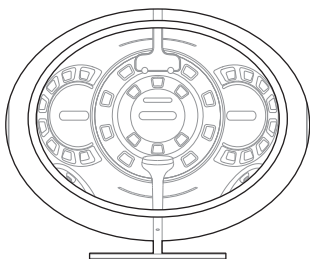

デバイス: 1台

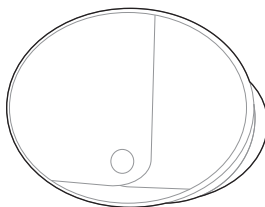

レンズフード: 1個



キャリブレーションプレート: 1枚



タブレットベース: 1個

電源アダプター: 1個


ハンドスクリュー: 8個（レンズフード固定用、取り付け用に6個、予備用に2個）

ユーザーガイド: 1部

純正の付属品を使用してください。

公式サイト: www.evelabinsight.com

パーツリスト

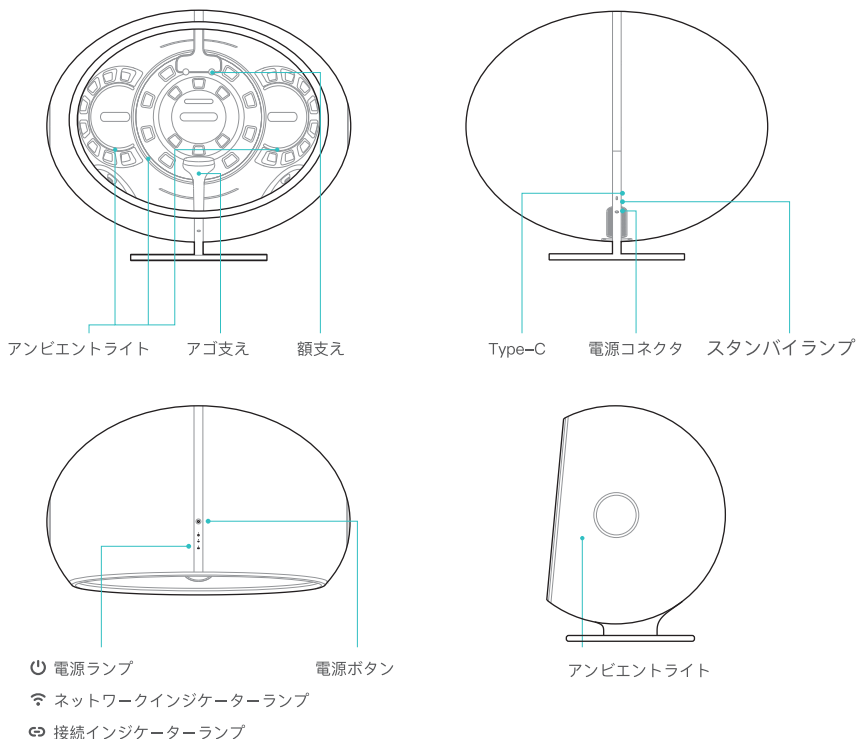

デバイスステータス

電源接続済み: デバイス背面にある赤色の電源ランプが点灯します。

起動中: 電源インジケータランプが点滅します。

デバイスの電源オン: 電源インジケータランプが常時点灯します。

ネットワーク接続中: ネットワークインジケータランプが点滅します。

ネットワーク接続済み: ネットワークインジケータランプが常時点灯します。

タブレット接続中: 接続インジケータランプが点滅します。


タブレット接続済み: 接続インジケータランプが常時点灯します。

電源オフ: 上部にあるすべてのインジケータランプが消えます。

マニュアル


I. 開梱ガイド

1. デバイスを取り出す: 外箱に記載されている指示に従って、デバイスを机上に置きます。(額当てと額当てをつかまないでください。額当ての後ろにあるカラーカードに触れないでください。)
2. レンズフードを取り付ける: 外箱からレンズフードを取り出し、付属品の入った箱からハンドスクリューを6個取り出します。下の図に表示されているとおり、6個のネジ穴からプラグを取り外し、ハンドスクリューを使ってレンズフードをデバイス本体に取り付けます。レンズフードに全面にあるロゴが机と平行になるようにします。
3. 電源に接続する: 電源コードをデバイスの背面に接続し、デバイスを充電した状態で維持します。これでデバイスを使用する準備ができました。

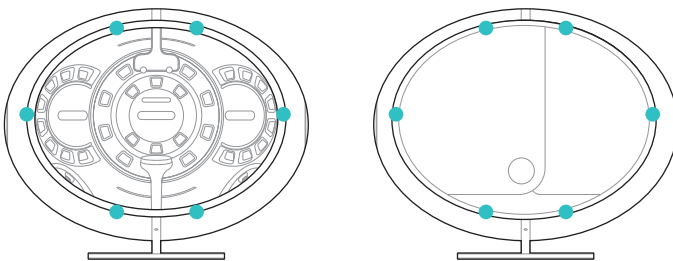

II. 電源と接続

1. 電源を入れる: デバイスの上部にある電源ボタンを短押しします。電源インジケータランプはデバイスの上部にあります。デバイスの電源が入ると短い電子音が鳴り、電源インジケータランプが常時点灯して起動プロセスが完了したことを示します。
2. ダウンロード: ご利用のタブレットでApp Storeを開き、「EveLab Insight – Eve V」アプリを検索します。ダウンロードしてインストールしてください。
3. ログイン: アプリを開き、ストアアカウントとパスワードを使ってログインします。
4. 接続: タブレットをデバイスの近くに置き、ソフトウェアのインターフェースに表示される指示に従って接続します。

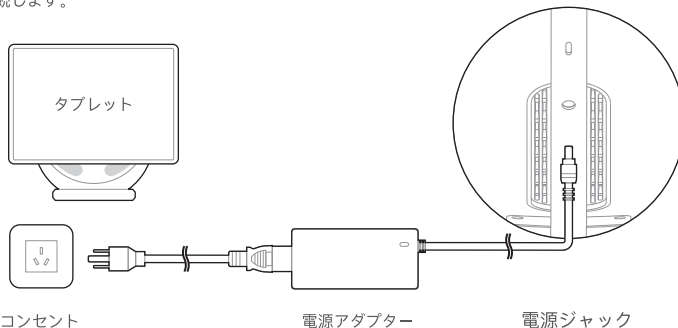

コンセント

電源アダプター

電源ジャック

III. 写真撮影と肌の分析

1. プロフィールを作成する: ソフトウェアのインターフェースに表示される指示に従って、顧客のプロフィールを作成します。
2. 清掃: 額当てと顎当てをアルコール綿で拭き取ります。
額当ての後ろにあるカラーカードにアルコールまたはその他の液体が触れてはいけません。
3. 写真撮影の準備をする: 顧客がお顔を洗淨したあと、デバイスの前に座ってもらい、顎と額をそれぞれ額当てと額当てに置いてもらいます。頭が真っ直ぐになっていることを確認し、両目を閉じてもらいます。
操作者はレンズフードを覆い、画面上に顧客の顔だけが写っていることを確認し、前髪、アクセサリー、眼鏡などが写り込んでいないことを確認してください。
4. 写真を撮影して肌を分析する: 操作者は指示に従って肌測定を行います。
5. レポートを説明する: 肌測定の完了後、操作者はタブレットを使用して顧客に肌分析レポートを見せながら説明します。
6. 電源を切る: 上部にある電源ボタンを短押しして電源を切ります。

IV. メンテナンスの手順

1. 操作者は測定を開始する前に毎回アルコール綿を使って顎当てと額当てを拭き取り、顧客が清潔な状態で測定を行えるようにします。
2. デバイスのケースは環境に優しい素材で作られています。清掃する必要がある場合は、アルコール綿を使って拭き取ってください。
※注意: 指やアルコール綿などが額当ての後ろにあるカラーカードとレンズに触れないようにしてください。
3. 測定カメラとランプは常に清潔な状態を維持してください。汚れ等ある場合、製品の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。
4. デバイスの精度に異常がある場合は、キャリブレーションボードを使用して修復してください。
特定の使用方法については、下のQRコードをスキャンして手順を参照してください。

次のコードをスキャンして詳細の使用説明を確認してください。



次のコードをスキャンしてアプリストアにEve Vのアプリをダウンロードすることができます。



EveLab Insight

ユーザーガイド

ストアアカウントとパスワードを忘れた場合に備えて記入しておきましょう。

アカウント: _____
パスワード: _____

01 プロフィールを作成する

ソフトウェアのインターフェースに表示される指示に従って、顧客のプロフィールを作成します。

02 清掃

額当てと顎当てをアルコール綿で拭き取ります。
(額当ての後ろにあるカラーカードにアルコールまたはその他の液体が触れてはいけません。)

03 準備

顧客がお顔を洗浄したあと、デバイスの前に座ってもらい、顎と額をそれぞれ顎当てと額当てに置いてもらいます。頭が真っ直ぐになっていることを確認し、両目を閉じてもらいます。操作者はレンズフードを覆い、画面上に顧客の顔だけが写っていることを確認し、前髪、アクセサリ、眼鏡などが写り込んでいないことを確認してください。

04 分析

操作者は指示に従って肌測定を行います。

05 レポートを説明する

肌測定の完了後、操作者はタブレットを使用して顧客に肌分析レポートを見せながら説明します。

次のコードをスキャンして詳細の使用説明を確認してください。



次のコードをスキャンしてアプリストアにEve Vのアプリをダウンロードすることができます。



このページを切り離して保管しておいてください。

安全上のご注意

こちらに記載されている注意事項は、デバイスを適切に使用し、ユーザーおよびその他の人々の身体および所有物に対するケガや損失を防ぐためのものです。次の注意事項を厳格に遵守してください。

1. 本製品には純正のEve V 電源アダプターのみ使用してください。それ以外の電源アダプターを使用した場合、電源に関する問題が発生したり、デバイスが損傷したりする可能性があります。
2. 使用中は、プラグをしっかりとコンセントに差し込んでおき、プラグを簡単に抜き差しできるようにしておいてください。
3. 電源アダプターが誤用された場合、電源コードが破損する可能性があります。電源コードがぬじれていて元に戻せない場合や、電源コードまたは電源コネクタが破損、変形、または故障している場合は本デバイスを使用しないでください。
4. 本デバイスを長期間使用しない場合は、乾燥した冷暗所に保管し、製品の破損を防ぐため硬い物を接触させないようにしてください。
5. 本製品と付属品を湿気の多い環境で長期間保管しないでください。湿気の多い環境で保管すると、製品の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。
6. 本デバイスを熱源や火に近付けないでください。
7. 本デバイスを水没させたり、水で洗い流したりしないでください。
8. 本デバイスはお子様の手の届かない場所に保管してください。
9. 本デバイスを許可なく分解、修理、改造しないでください。
10. 電源が入っている時に電源コードをコンセントから抜かないでください。
11. 本製品は精密機器です。損傷を避けるため、製品を投げたり、製振動させたり、叩いたり、引きずるなど乱暴に扱ったり等しないでください。

保証/修理

I. ご購入日より1年間、保証サービスをご利用いただけます。保証サービスのご利用には、請求書、領収証、保証書の提示が必要です。保証期間中に製品品質に起因する問題がデバイスに発生した場合、無料で修理またはメンテナンスサービスを受けることができます。

II. 保証の対象外となる条件は次のとおりです:

- 1. 正規の販路から製品が購入されていない場合。
- 2. 保証期間が超過している場合。
- 3. 許可なく解体または修理を行ったことによる損傷。
- 4. 液体に沈める、または落とすなどの人為的な原因による回路基板の焼損。
- 5. 不適切な設置、使用、メンテナンス、保管によって生じた損傷。
- 6. 保証書が製品モデルと一致していない、または保証書が改ざんされている場合。
- 7. 不可抗力によって生じた損傷。

保証書

シリアル番号		
顧客	名前	
	電話番号	
	住所	
	請求書番号	
	購入日	
販売代理店/会社	名前	
	電話番号	
	住所	

仕様書

ブランド名: EveLab Insight

製品名: EveLab Insight – Eve V Skin Imaging Analysis System

製品モデル: MS20A15

色: オーロラホワイト

材質: PC / シリコン / 金属

動作温度: 0℃～40℃

本体外寸: 642x400x530mm

定格電圧: 12V

実行基準: GB4706.1–2005、GB4706.15–2008


콘텐츠

제품 소개	18
구성품 목록	18
부품 목록	19
장치 상태	19
매뉴얼	20
주의사항	22
보증/수리	23
보증서	23
사양	24
English Version	1
Japanese Version	9


제품소개

Eve V는 3D 파노라마 인공 지능 피부 분석기입니다. 단 몇 초 만에 Eve V는 피부 진피층 깊숙한 부분을 시각화하여 35종 이상의 항목으로 분석한 심층적인 맞춤형 피부 보고서를 생성할 수 있습니다.

구성품 목록

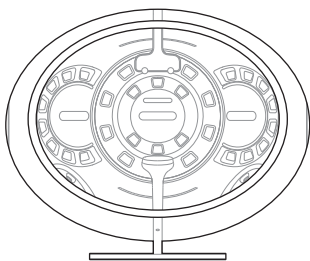

본체: 1개

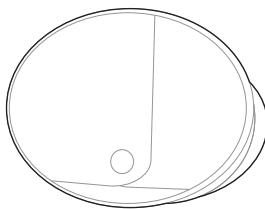

렌즈 후드: 1개



보정 플레이트: 1개



태블릿 베이스: 1개

전원 어댑터: 1개


핸드 나사: 8개(렌즈 후드 설치용 나사 6개, 예비용 나사 2개)

사용 설명서: 1부


정품 액세서리를 사용하세요.

공식 웹사이트: www.evelabinsight.com


부품 목록

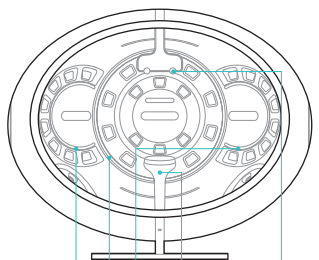


주변광 턱 받침대 이마 지지대

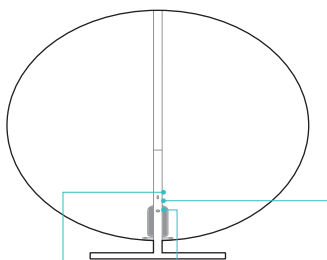

C형 커넥터 전원 커넥터

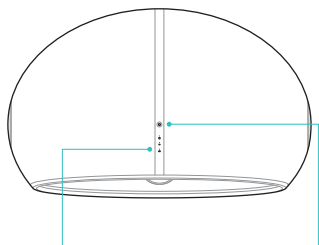

⏻ 전원 표시등 전원 버튼
네트워크 표시등
연결 표시등

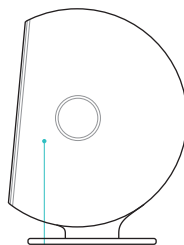

주변광

장치 상태

전원 연결됨: 장치 뒷면의 빨간색 대기 표시등이 항상 켜져 있어야 합니다.

시작 중: 전원 표시등이 깜박입니다.

장치 전원이 켜짐: 전원 표시등이 항상 켜져 있습니다.

연결할 네트워크: 네트워크 표시등이 깜박입니다.

네트워크가 연결됨: 네트워크 표시등이 항상 켜져 있습니다.

연결될 태블릿: 연결 표시등이 깜박입니다.


태블릿이 연결됨: 연결 표시등이 항상 켜져 있습니다.

전원 꺼짐: 상단의 모든 표시등이 꺼져야 합니다.

메뉴얼


I. 언박싱 가이드

1. 장치 꺼내기: 장치를 박스에 적힌 안내에 따라 책상 위에 놓습니다.
(이마 지지대나 턱 받침대를 잡지 마시고 이마 받침대 뒷면의 컬러카드를 만지지 마세요.)
2. 렌즈 후드 설치: 상자에서 렌즈 후드를 꺼내고 액세서리 상자에서 6개의 렌즈 나사를 꺼냅니다. 메인 장치에 표시된 위치에서 6개의 나사 구멍 플러그를 제거하고 드라이버를 사용하여 렌즈 후드를 메인 장치에 설치합니다. 렌즈 후드 전면의 로고는 데스크탑과 평행을 이루어야 합니다.
3. 전원 공급 장치에 연결: 장치 뒷면에 전원 코드를 연결합니다. 이제 장치 사용 준비가 완료되었습니다.

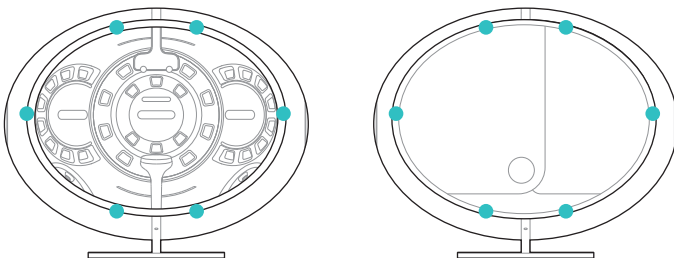

II. 전원 및 연결

1. 전원 켜기: 장치 상단의 전원 버튼을 짧게 누릅니다. 전원 표시등은 장치 상단에 있습니다. 장치가 전원이 켜진 상태를 나타내는 신호음이 들리고 전원 켜기 프로세스가 시작되었음을 나타내는 전원 표시등이 항상 켜져 있어야 합니다.
2. 다운로드: 태블릿에서 앱스토어를 열고 "EveLab Insight - Eve V" 앱을 검색합니다. 다운로드하여 설치합니다.
3. 로그인: 앱을 열고 스토어 계정과 비밀번호로 로그인합니다.
4. 연결: 태블릿을 장치 가까이 놓고 소프트웨어 인터페이스의 프롬프트에 따라 연결합니다.

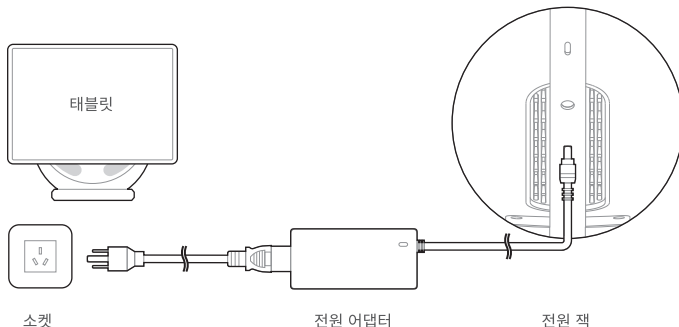

III. 사진 촬영 및 피부 분석

1. 프로필 만들기: 소프트웨어 인터페이스의 프롬프트에 따라 고객 프로필을 만듭니다.
2. 청소: 이마 지지대와 턱 지지대의 전면을 면 알코올 패드로 닦습니다. **(이마 지지대 뒷면의 컬러카드에 알코올이나 기타 액체가 닿지 않도록 조심하세요.)**
3. 사진촬영준비: 고객이 세안을 마친 후 앞머리, 장신구, 안경 등으로 얼굴이 가려지지 않도록 합니다.
그런 후에, 고객이 기기 앞에 앉아 턱 지지대에 턱을 대고, 이마를 이마 지지대에 대고, 눈을 감습니다.
그런 다음 작업자는 커버 후드로 고객의 머리를 가리고, 사진을 찍기 전 화면에 고객 얼굴이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.
4. 사진 촬영 및 피부 분석: 작업자는 소프트웨어 인터페이스의 프롬프트에 따라 피부 감지를 수행합니다.
5. 보고서 설명: 피부 분석이 완료되면, 작업자는 태블릿을 통해 고객에게 피부 분석 보고서를 보여주고 설명할 수 있습니다.
6. 전원 끄기: 상단 전원 버튼을 짧게 눌러 전원을 끕니다.

IV. 유지 보수 지침

1. 각 피부 부위를 감지하기 전에 작업자는 알코올 패드를 사용하여 이마 지지대와 턱 지지대의 전면을 닦아 장치 청결도를 유지해야 합니다.
2. 장치의 케이스는 환경 친화적인 재료로 제작되었습니다. 청소가 필요한 경우 알코올 패드로 닦으세요.
※참고: 렌즈와 이마 지지대 뒷면의 컬러카드를 손가락, 알코올 패드 등으로 만지지 마세요.
3. 감지 카메라와 조명 기구를 깨끗하게 유지하세요. 제품의 성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
4. 장치의 정확도가 비정상인 경우 보정 보드를 사용하여 수리할 수 있습니다. 구체적인 사용법은 아래 QR코드를 스캔하여 안내 사항을 참고하세요.

자세한 내용을 보려면 아래 QR코드를
스캔해주세요.



자세한 내용을 보려면 아래 QR코
드를 스캔해주세요.





사용자가이드

스토어 계정과 비밀번호를 잊어버린 경우를 대비하여 메모해 둘 수 있습니다.

계 정 : _____
패스워드 : _____

01 프로필 생성

소프트웨어 인터페이스의 프롬프트에 따라 고객을 위한 프로필을 생성합니다.

02 청소

이마 지지대와 턱 지지대의 전면을 면 알코올 패드로 닦습니다. (이마 지지대 뒷면의 컬러카드에 알코올이나 기타 액체가 닿지 않도록 합니다.)

03 준비

고객이 세안을 마친 후 앞머리, 장신구, 안경 또는 기타 물품으로 얼굴을 가리지 않도록 합니다. 그런 다음 고객이 턱 지지대에 턱을 대고 이마를 이마 지지대에 대고 머리를 똑바로 하고 눈을 감은 상태로 기기 앞에 앉게 합니다. 그런 다음 작업자는 렌즈 후드로 고객의 머리를 가리고 사진을 찍기 전에 고객의 얼굴만 화면에 표시되는지 확인해야 합니다.

04 분석

작업자는 소프트웨어 인터페이스의 프롬프트에 따라 피부 감지를 수행합니다.

05 보고서 설명

피부 분석이 완료되면, 작업자는 태블릿을 통해 고객에게 피부 분석 보고서를 보여주고 상담을 진행합니다.

자세한 내용을 보려면 아래 QR코드를 스캔해주세요.



다음 코드를 스캔하여 앱스토어에서 Eve V 앱을 다운로드하세요.



본 페이지를 따로 떼어 보관하세요

주의사항

본 주의사항은 제품을 올바르게 사용하여 사용자 및 타인의 상해 및 재산상의 손해를 방지하기 위한 것입니다. 주의사항을 반드시 지켜주세요.

1. 이 제품에는 정품 Eve V 전원 어댑터만 사용하세요. 전원 관련 문제나 장치 손상이 발생할 수 있습니다.
2. 사용하는 동안 전원 플러그를 전원 콘센트에 단단히 연결하고 쉽게 플러그를 꽂고 뺄 수 있는지 확인합니다.
3. 전원 어댑터를 잘못 사용하면 전원 코드가 끊어질 수 있습니다. 전원 코드가 꼬여서 복구할 수 없거나 전원 코드 또는 전원 커넥터가 손상, 변형 또는 파손된 경우 장치를 사용하지 마십시오.
4. 장치를 장기간 사용하지 않을 때는 건조하고 어둡고 서늘한 곳에 장치를 보관하고 제품이 손상되지 않도록 단단한 물체와의 접촉을 피하세요.
5. 제품 및 액세서리를 습기가 많은 환경에 장기간 보관하지 않도록 합니다. 제품의 성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
6. 본 장치를 열원이나 화염에서 멀리 둡니다.
7. 장치를 물에 담그거나 물로 행구지 말아주세요.
8. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 장치를 보관합니다.
9. 허가 없이 본 장치를 분해, 수리 또는 개조하는 행위를 삼가해 주세요.
10. 전원이 켜진 상태에서 전원 코드를 뽑지 마세요.
11. 본 제품은 정밀 기기이므로 손상이 가지 않도록 거칠게 다루거나 흔들거나 두드리지 않도록 주의합니다.

보증/수리

I. 구매일로부터 청구서, 쇼핑목록, 보증서 제시 시 1년간 보증 서비스를 제공합니다. 보증 기간 동안 제품 품질의 문제로 장치에 문제가 발생하면 무상 수리 및 유지 보수 서비스를 받을 수 있습니다.

II. 다음 조건은 보증 범위에 포함되지 않습니다.

1. 공식 채널에서 구매하지 않은 제품
2. 보증기간을 초과한 경우
3. 임의로 분해 또는 수리하여 발생한 손상
4. 액체에 잠기거나 떨어뜨리는 등의 인적 과실로 인한 회로 기판의 소손
5. 부적절한 설치, 사용, 유지 보수 또는 보관으로 인한 손상
6. 보증서가 제품 모델과 일치하지 않거나 보증서가 변경된 경우
7. 불가항력으로 인한 손상

보증서

S/N		
고객	성	
	휴대폰 전화번호	
	주소	
	송장 번호	
	구매 날짜	
대리점/단체	성	
	휴대폰 전화번호	
	주소	

사양

브랜드명: EveLab Insight

제품명: EveLab Insight - Eve V Skin Imaging Analysis System

제품 모델: MS20A15

색상: 오로라 화이트

재질: PC / 실리콘 / 금속

작동 온도: 0°C - 40°C

전체 기계 크기: 642mm*400mm*530mm

정격 전압: 12V

실행 표준: GB4706.1-2005, GB4706.15-2008

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 . This device may not cause harmful interference, and
- 2 . This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1 . Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2 . Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3 . Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4 . Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Company: Xiamen MeituEve Technology Co., Ltd.

Address: Room 568, No. 942, Tonglong 2nd Road, Torch High-Tech Zone (Xiang'an) Industrial Zone, Xiamen

Manufacturer: Hongtai Electromechanical Technology (Zhangzhou) Co., Ltd.

Address: No. 20, Longchi Avenue, Longchi Industrial Park, Taiwanese Investment Zone, Zhangzhou, Fujian Province

Website: www.evelabinsight.com

©2022 All Rights Reserved, Xiamen MeituEve Technology Co., Ltd.

MADE IN CHINA