




迷你穿戴吸奶器

使用说明书

(型号: YY-A46)

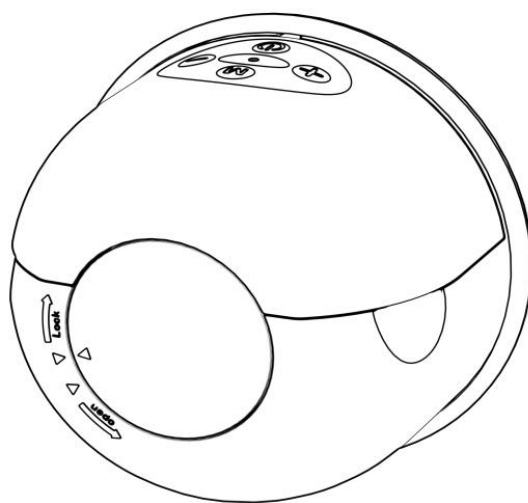

The best gift to a new mom. A perfect appliance of breast feeding

Mini Wearable Breast Pump (Model No. YY-A46)




感谢您选购本公司产品，为了使我们的产品能更好地为您服务，在使用前请详细阅读本说明书，并悉心保存，以方便您日后维护与保养。

产品介绍

母乳含有宝宝成长所需的所有营养和抗体，每个妈妈都希望自己宝宝能享用这最自然、最安全、最营养的天然食物。“特乐”从心出发，着力打造最适合中国妈妈的哺乳用品，给她们带来最佳的哺乳体验，帮助妈妈们坚持母乳喂养。

“特乐”电动吸奶器，利用科学原理自然模拟宝宝吮吸节奏，6档吸力大小可供选择，自然快速吸出乳汁，让妈妈们享受每一次吸乳时光，该产品体积小小巧方便携带，操作简单，内置可充电电池，USB-Type C充电接口。为便妈妈使用，产品配备有专属智能APP，方便产品操作，提高产品隐蔽性。

产品部件名称

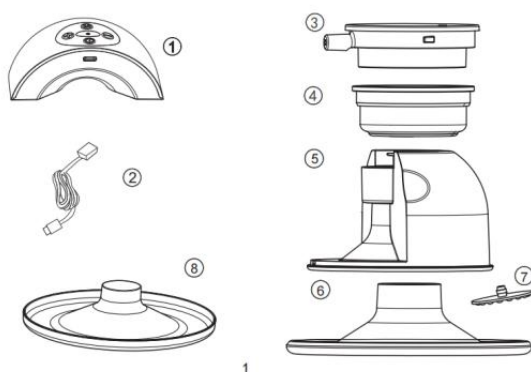

Congratulations on your new baby! It's our pleasure to offer you products and services. Please read this manual before use and keep it carefully for your future maintenance and care.

Introduction

Breast milk contains all the nutrients and antibodies the baby needs to grow up, and every mother wants her baby to enjoy the most natural, safest, and most nutritious natural food. Starting from the heart, Kidro strives to create the most suitable breastfeeding products for Chinese mothers, bring them the best breastfeeding experience, and help mothers adhere to breastfeeding.

Kidro electric breast pump simulates the baby's sucking rhythm, with six gears to adjust, allowing mothers to enjoy every breast-sucking time. The product is small, easy to carry and operate, built-in rechargeable battery, USB-Type C charging interface, and with intelligent APP to facilitate product operation.

Breast Pump Components

编号	名称	材质	是否可高温消毒
1	主机	ABS	×
2	USB线		×
3	气缸盖	PP	√
4	吸力硅胶碗	液态硅胶	√
5	储奶樽	PP	√
6	喇叭罩	液态硅胶	√
7	防逆流片	硅胶	√
8	防尘盖	PP	√ (可不用消毒)

清洁消毒

① 清洁

将编号列表中可高温消毒的部件一一拆开，用安全清洗剂清洗干净；

No.	Name	Material	Can be sterilized at high temperature
1	Pump Unit	ABS	×
2	USB Cable		×
3	Diaphragm Cap	PP	√
4	Diaphragm	Liquid silicone	√
5	Milk Bottle	PP	√

6	Breast Shield	Liquid silicone	√
7	Valve plate	Silicone	√
8	Dust Cover	PP	√ (Can without sterilization)

Cleaning and Sterilizing

① Cleaning


Separate all parts that can be sterilized at high temperature and clean them with a safety cleaner.

kidro 特乐


消毒

- 将清洗干净的部件用消毒锅进行消毒，选用煮沸消毒时一定要将水浸没所有待消毒的吸奶器零配件，煮沸时间至少5分钟；
- 每天消毒1-2次即可，对于吸乳频率相对较高（2-3小时进行一次）则建议无需每次使用后都进行消毒，过度消毒容易造成配件过早老化，减少吸奶器的使用寿命，建议每天彻底清洗一次乳罩及消毒一次即可；
- 如果吸乳是为了储存目的，则务必消毒所有的吸奶器配件，否则母乳易变质。


安装步骤



1. 将吸力气缸碗套入气缸盖上；



2. 将防逆流片按照箭头方向装在奶罩上，并确保边缘吻合；



3. 将吸好吸力气缸碗的气缸盖装入奶罩；并按照方向锁紧



4. 将喇叭罩按照图示方向装入奶罩，并扣入奶罩的边缘，防止漏奶。



5. 将主机按照箭头装入奶罩，确认一下产品是否平整；

使用方法

准备

- 将已经消毒好的吸奶器配件，按“安装步骤”组装完整；
- 检查产品是否电量充足，以免在使用过程充放电，影响产品使用；
- 清洁您的双手和乳房；
- 选择一张舒适的座椅，放松身体，稍稍向前倾斜。

3

② Sterilizing

- Soak all parts that come in contact with your breast and breast milk, and sterilize for at least 5 minutes.
- Can sterilize 1-2 times a day. For relatively frequent breast pumping (Performed once every 2-3 hours), not recommended to sterilize after each use. (Excessive sterilization may cause premature aging of the parts and reduce the service life of the breast pump) Recommend thoroughly cleaning and sterilizing the milk stains once a day.
- Before sucking breast milk, all breast suction accessories must be sterilized to prevent breast milk from deteriorating.

Installation Guide

1. 将吸力气缸碗套入气缸盖上

Put diaphragm cap on the diaphragm.

2. 将防逆流片按照箭头方向装在奶罩上，并确保边缘吻合

Install the valve plate on the milk bottle and make sure they are fixed securely.

3. 将装好吸力气缸碗的气缸盖装入储奶樽；并按照方向锁紧

Install diaphragm cap with the diaphragm into the milk bottle, and screw the diaphragm cap clockwise.

4. 将喇叭罩按照图示方向装入储奶樽，并扣入奶樽的边缘，防止溢奶

Insert the breast shield into the milk bottle and snap it into the rim of the bottle to prevent spillage

5. 将主机按照箭头,装入奶樽，确认下一下产品是否平整

Put the pump unit into the milk bottle and confirm whether the product is flat

Buttons and Operation Guide

① Preparation

· 将已经消毒好的吸奶器配件，按“安装步骤”组装完成

Sterilize breast pump components according to the "Installation Guide".

· 检查产品是否电量充足，以免在使用过程充缺电，影响产品使用

Make sure the product is fully charged to avoid lacking power during the use of the product.


· 清洁您的双手和乳房

Clean your hands and breasts.

· 选择一张舒适的座椅，放松身体，稍稍向前倾斜。

Choose a comfortable seat, relax and lean forward slightly.

2 操作面板及显示说明

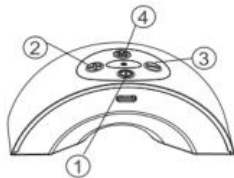

APP初始界面



APP工作界面



- ① 电源键：开关机；触控约2秒开关机，开机是产品处于暂停状态，需要再次触控产品开关键或者APP上的启动按键开启产品的工作状态。APP上的关机按钮，不能完全关掉主机。
- ② + 吸力增加键：主机与APP触控一次吸力增加一个档位；
- ③ - 吸力减少键：主机与APP触控一次吸力减少一个档位；
- ④ M 模式切换键：主机与APP触控一次切换按摩模式与吸乳模式；
- ⑤ Find Device 当设备开启时：点击APP初始界面“Find Device”时自动连接第一台设备，点击APP工作界面“Find Device”时，自动连接第二台设备。设备名称Kidro-L, Kidro-R；
- ⑥ 暂停启动键：APP触控此键，暂停或启动产品；
- ⑦ 按摩模式指示图标：紫色灯表示产品处于按摩模式，共计6档刺激母乳分泌，为吸乳准备；
- ⑧ 吸乳模式指示图标：蓝色灯表示产品处于按摩模式，共计12档吸乳，更好的解决；
- ⑨ 产品状态指示图标：绿色灯表示产品处于正常开机状态，产品暂停时会显示此状态。
- ⑩ 充电状态指示图标：黄色灯闪烁时表示产品处于正常充电状态，电量充满时会进入绿色灯。
- ⑪ 缺电状态指示图标：红色灯闪烁时表示产品处于缺电状态，需要充电。

使用步骤

- ① 将软硅胶喇叭口贴紧乳房并轻轻压紧，以防出现缝隙而漏气；
- ② 电源键 触控约2秒开启电源，开机即为按摩模式（刺激母乳分泌，按摩过程为2分钟），此需根据自身感受或APP的显示，在APP或主机上触摸“加/减键”+/- 调整适合自己的吸力；
- ③ 按摩结束后，则自动进入吸乳模式（在APP或主机上触摸“模式切换键”M 提前结束按摩进入吸乳模式），此时需要根据自身感受或APP的显示，触摸“加/减键”+/- 调整适合自己的吸力；

② Pump Controls and Display (操作面板及显示说明)

App 初始界面 App initial interface

查找设备 Find a Device

App 工作界面 App working interface

查找设备 Find a Device



Power Button: Press the POWER BUTTON for about 2 seconds to turn the unit on. (After the power is on, the product is in a suspended state.)

Need to touch the button again or touch the start button on the APP to turn on the working state of the product. (APP's shutdown button, can not completely turn off the host)



Suction Increase: Increase suction force



Suction Decrease: Reduce suction force



Mode Switch: Switch between massage mode and expression mode



Kidro (APP): Click "Find Device" on the initial interface of the APP (Kidro), automatically connect the first device (Kidro-L), and click "Find Device" on the work interface, automatically connect the second device (Kidro-R)



Pause/work indicator: Press this button on APP to pause or start the product



Massage mode indicator: Purple light indicates the mode (Suction level: 1-6)



Expression mode indicator: Blue light indicates the mode (Suction level: 1-12)



State indicator: Green light indicates the normal power-on status



Power indicator: Yellow light indicates the pump is being charged. (Green light when full of power)



Battery level indicator: Flashing red light means battery is low

Pumping with Kidro

- ① Place the breast pumps onto your breasts. Make sure that you center your nipples.
- ② Turn on the Kidro by holding the power button. When turning on, massage mode will begin. Use the increase and decrease buttons on pump controls or APP to find a comfortable suction level.
- ③ After 2 minutes, expression mode will automatically begin. (Press mode switch button will end massage mode early and enter expression mode) Again, use the

increase and decrease buttons on pump controls or APP to find a comfortable suction level.



- ④ 因APP无法直接关掉主机，吸乳结束后，触按产品“电源键”⏻ 约2秒关闭电源（医生建议：为了保护您的乳房，单次单边吸乳时间最好不要超过20分钟，本机单次的工作时间超过30分钟后将会自动关机。

注：本机具有记忆功能，关机后再次开机使用会记忆前一次使用的档位。

温馨提示：

- 如果一时吸不出母乳，请不要持续强行使用吸奶器超过5分钟，换个时间再试；
- 一般情况下，吸出60-125ml的乳汁大约需要10分钟时间，但是各人情况不同，会有差异，如果一次吸出的母乳超过150ml，请使用更大的奶桶；
- 不要把奶瓶装的太满，否则母乳会溢出；
- 哺乳期为方便吸乳和哺乳，建议妈妈佩戴哺乳内衣。

供电说明

- ① 使用家用手机充电适配器（5V, 1A）
- ② 本机使用聚合物电池供电（满电量情况下可连续使用约80分钟）
- ③ 使用移动电源充电
- ④ 使用USB线连接电脑供电

电池充电说明



5

④ APP can not directly turn off the breast pump. After breast pumping, touch the power button ⏻ for about 2 seconds to turn off the unit.

(Doctor's advice: to protect your breasts, the best time for a single breast pumping time is no more than 20 minutes, the product will automatically shut down after a single working time of more than 30 minutes.)

Note:

Kidro has a memory function, after turning off the product and then turning it on again to use will remember the previous use of the gear.

Advice:

- If you can't suck breast milk, please don't keep forcing the breast pump for more than 5 minutes, try again at another time.
- Generally, it takes about 10 minutes to pump out 60-125ml of breast milk, but it will vary from person to person. Please use a larger milk bottle if more than 150ml of breast milk is pumped out at one time.
- Do not fill the milk bottle too full.


Power supply

- ① Use the charging adapter (5V ,1A)

- ②Build-in lithium battery(can be used for about 80 minutes at full power)
- ③Can be charged by power bank
- ④Use a USB cable to connect a computer for charging

Charging your Kidro

电池用完时

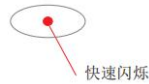

快速闪烁

在使用产品的工作过程中，指示灯亮起红色，并出现快速闪烁时，表示产品，电池电量不足，需要及时为本机充电；

Battery Power Exhausts

Fast Flashing

When battery power is on and the pump is on any level of massage or expression mode, the red light flashes quickly and indicates that battery power is exhausted and needs to be charged.

充电时



慢速闪烁

插上电源适配器为本机充电，产品指示灯将变成黄色，慢速闪烁；

Being Charged

Slow Flashing

When power adapter is connected with pump, LED will light up in yellow until battery is fully charged.

充满时



常亮

当产品指示灯转换成绿色常亮时，则表示产品的电池电量已经充满。

Fully Charged

Not Flash

When fully charged, the battery indicator will stop flashing and LED turns to green.

如何储存吸出的母乳

母乳状态		室温状态下	冰箱冷藏室 (约4℃)	冰箱冷冻室 (经常开门约-16℃)	独立冷冻室 (不经常开门约-18℃)
保存时间	刚吸出的母乳	请勿长时间放在室温下	48小时	3个月	6个月
	已解冻的母乳	请勿储存	请勿储存	不得再次冷冻	

*本表适用于足月健康婴儿，仅供参考，详情请向医院咨询相关资讯。

温馨提示：

- 母乳吸出后必须马上冷藏或冷冻；
- 将吸出的母乳放在储奶瓶或储奶袋中密封好，并标明时间，放入冰箱中冷藏储存或者冷冻储存，
冷藏时间不应超过48小时，冷冻时间不超过3个月；
- 储奶瓶或者储奶袋中的母乳量不得超过容器容积的3/4，因为液体冷冻后体积会膨胀；
- 请勿将母乳储存在冰箱冷藏室内侧的储物格上；
- 请勿将解冻后的母乳再次冷冻；

如何用吸出的母乳喂养孩子

① 隔水烫热法

如果是冷藏的母乳，把母乳容器放进温水里浸泡，使母乳吸收水里的热量而变得热，浸泡时，要不时晃动容器使母乳均匀受热；

如果是冷冻的母乳，需要提前24小时把冷冻的母乳放在冰箱冷藏室中解冻，或泡冷水中解冻，

② 暖奶器加热法

把暖奶器的温度设定在40℃，将母乳容器放到暖奶器内隔水加热，温度更容易掌握。

*如果是冷冻的母乳，可能会出现液体分层状态，这是正常现象，只要在喂食前轻轻摇晃将其混合均匀即可。

Storing Breast Milk

Storage location	Temperature	Max. Storage duration
Room	12-29℃ (60-85°F)	4 hours
Refrigerator	4℃ (39°F)	4 days
Freezer	<-4℃ (25°F)	0-6 months

*The above only applies for infants one month of older. Please consult a doctor for more details.

Warning:

- Fresh breast milk should be stored in refrigerator or freezer.
- Be sure to date the milk for storage. Milk should be stored in a refrigerator for no longer than 48 hours and the freezer for no longer than 3 months.
- When freezing, maximum milk volume should be 3/4 of storage bottle. Milk can expand during freezing.
- Do not store breast milk on the storage compartment on the inside of the cold room door of the refrigerator.
- Do not refreeze thawed milk.

Feeding Breast Milk

① Using warm water:

If the milk is refrigerated, put the milk container in warm water to heat the milk. Shake the container to warm the milk through.

If the milk is frozen, defrost in the refrigerator 24 hours prior to using. Once defrosted, warm it as refrigerated milk.

② Using milk heater:

Turn on milk heater and set it to 40°C. Put milk container into heater.

*Layers of liquid may be for when using frozen milk. This is normal. Please shake the bottle well before feeding.



温馨提示:

- 解冻后的母乳不可重复加热;
- 请勿用微波炉解冻或加热母乳;
- 请勿放在滚烫的热水中解冻或加热母乳;
- 选用热水浸泡母乳, 喂奶前需测试一下温度以免过热或过冷。

吸奶器疑难问题解答

故障现象	故障原因 (现象)	排除方法
不能开机	电池电量低	连接电源适配器使用或先给电池充电一会再使用
吸力小	连接部位漏气 (防逆流片 ⑦、吸力硅胶圈 ④、软硅胶喇叭罩 ⑤)	检查各连接部件重新安装妥当
	主机输出气路阻塞	清洁检查气路改的出气孔是否堵塞
	未找到原因	请拨打全国客服电话: 400-666-8841 咨询
无吸力	防逆流片漏装、未装平整或变形损坏	重新装配或更换防逆流片
	未找到原因	请拨打全国客服电话: 400-666-8841 咨询

注: ④、⑤、⑦ 部件说明见第一页产品部件名称

温馨提示:

- 开机两分钟后, 机器自动由按摩模式转为吸乳模式;
- 吸奶器连续工作30分钟后, 机器保护性自动关机, 重新开启即可;
- (医生建议: 为了保护您的乳房, 单次单边吸乳时间最好不要超过20分钟)
- 吸乳时略微向下倾斜上身, 确保乳汁顺利流入储奶桶。

7

Warning:

- Do not heat thawed milk again.
- Do not use microwave oven to defrost breast milk.
- Do not heat milk with boiling water.
- If hot water is used to heat milk, please try milk temperature before feeding.

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solution
Pump does not work	Empty battery	Recharge battery
Low suction force	Air leakage at connection positions (Valve plate, diaphragm, breast shield)	Check all connecting parts to make sure they are installed properly
	The output air path of breast pump is blocked.	Straighten or clean air tubing
	No cause found	Please contact National Customer Service Tel: 400-666-8841
No suction	Valve plate is not installed or damaged due to deformation	Reinstall or replace valve plate
	No cause found	Please contact National Customer Service Tel: 400-666-8841

Warning:

- After touching the power button for about 2 minutes, this product automatically changes from massage mode to expression mode.
- The product will automatically shut down after a single working time of more than 30 minutes.

(Doctor's advice: to protect your breasts, the best time for a single breast pumping time is no more than 20 minutes)

- When sucking milk, the body leans slightly down to ensure that the milk flows smoothly into the bottle.



什么阶段使用吸奶器

- ① 如果母乳喂养对您非常顺利，建议等到母乳分泌和哺乳时间形成规律之后开始使用（除有特别要求外，一般至少在宝宝出生后2至4周后开始使用）；
- ② 在下列情况下，可以随时使用吸奶器：
 - ① 如果您无法立即母乳喂养，定期吸乳将有助于建立和维持母乳分泌；
 - ② 如果您是给在医院住院的宝宝喂奶；
 - ③ 如果您的乳房很胀（有胀痛），您可以在两次喂养之间吸出一部分母乳以减轻疼痛，这样也能使宝宝更容易吮吸；
 - ④ 如果您的乳头疼痛或开裂，无法直接喂食宝宝，可以将母乳吸出后喂养，直到乳头恢复正常；
 - ⑤ 如果您要和宝宝分开且希望重聚时继续母乳喂养，可以定期吸出母乳，以保持母乳正常分泌。

使用小技巧

- 选择一个不易被打扰、悠闲的时段；
- 使用吸奶器时，让宝宝待在您身边或者放一张宝宝的图片；
- 开始吸乳前，用热毛巾在乳房上敷揉一会儿；
- 可在沐浴后吸奶，因为此时您的身体处于温暖和放松的状态；
- 当宝宝吃奶时，对另一侧的乳房使用吸奶器，或者在宝宝吃完后接着用吸奶器吸出剩余的乳汁；
- 不时更换吸奶器在乳房上的位置，以刺激乳汁分泌。
- 练习使用吸奶器直至找到最适合您的方式，但是当使用吸奶器给您造成痛苦时，应立即停止并咨询医生。

The stage of using the breast pump

① If breastfeeding is going very well, it is recommended to wait until a regular pattern of breast milk secretion and breast-feed time has developed (unless specifically requested, usually started at least 2 to 4 weeks after the baby's birth).

② In the following cases, you can use it at any time:

① Unable to breastfeed immediately, regular breast pumping will help breast milk

secretion.

- ② To breastfeed baby in the hospital.
- ③ Distension and pain of the breasts. (You can suck out part of the breast milk between feeding to relieve the pain, which can also make the baby suck easier).
- ④ If the nipples are sore or cracked and unable to feed the baby directly, you can suck out the breast milk until the nipples return to normal.
- ⑤ Temporarily separated from the baby and want to continue breastfeeding in the future. Can suck out the breast milk regularly to keep the breast milk secretion.

Tips

- Choose a time of day when you are less likely to be disturbed and relaxed.
 - Keep the baby by your side or putting a picture of the baby while using the breast pump.
 - Put a hot towel on the breast for a while before starting to pump.
 - Suckle after a bath when your body is warm and relaxed.
 - Use a breast pump on the other breast while the baby is breastfeeding, or follow up with a breast pump to suck out the remaining milk after the baby has finished.
 - Use a breast pump on the other breast while your baby is breastfeeding or follow up with a breast pump to suck out the remaining milk after your baby has finished.
 - Change the position of the breast pump on the breast from time to time to stimulate milk secretion.
- * Practice using the breast pump until you find what works best for you, but if using the breast pump causes you pain, stop immediately and consult the doctor.



注意事项

1. 本产品属精密电子产品，请勿在沐浴时使用，保存时请置于阴凉干燥通风处，避免阳光直射，并应放置在儿童不能触摸到的地方；
2. 充电完成后请拔掉电源适配器；
3. 本产品系个人专用产品，请勿多人使用，以免交叉感染病菌；
4. 怀孕期间切勿使用吸奶器，因为过早吸乳，会刺激子宫收缩，可能导致流产；
5. 在真空的条件下，切勿强行从乳房上取下吸奶器，请关闭电源并用手轻轻打开乳房与吸奶器之间的密封，再从乳房上取下吸奶器；
6. 拆卸或组装时，请务必按组装顺序将每个部件组装完成，拆卸清洗时，请小心较小的部件，避免遗失造成无法组装或机器无法正常运行等问题；
7. 请依据个人体质设置吸气大小，以最舒适的吸力完成吸乳；
8. 使用前请用清水清洗干净，并进行消毒；
9. 医生建议单次单边吸乳时间不超过20分钟，以免乳房受伤；
10. 消毒前，请将产品部件拆卸后消毒，消毒后，请将产品部件冷却约20分钟后，才可以组装使用；

技术参数

产 品 名 称	迷你穿戴式吸奶器
产 品 型 号	YY-A46
电 源 输 入	AC100-240V, 50-60Hz, 0.2A
电 源 输 出	5V-1A
额 定 功 率	3.5W
电 池	3.7V/1000mAh
执 行 标 准	GB 4806.7-2016, GB 4806.2-2015, GB 4806.11-2016,

Warnings

1. This product is a precision electronic appliance. Please do not use it during bathing.

Please keep it in a cool, dry and ventilated place, avoid direct sunlight, and keep it out of the reach of children.

2. Unplug the power adapter after use.
3. This product is for personal use only. Do not use it between more than one person to avoid cross infection.
4. Do not use a breast pump during pregnancy, because early breast milk expression will stimulate uterine contraction which may lead to abortion.
5. Do not forcibly remove breast shield from breast. Please power off and gently release the seal between the breast and the breast shield, and then remove breast shield from the breast.
6. When disassembling or assembling the pump, make sure to assemble each part according to the installation Guide. When disassembling and cleaning, please be careful not to misplace/lose the small parts.
7. Set the suction level according to individual physique to ensure comfortable milk expression.
8. Please clean with water and disinfect before use.
9. Doctor's advice: to protect your breasts, the best time for a single breast pumping time is no more than 20 minutes.
10. Please disassemble the product parts and disinfect them, and let them cool for about 20 minutes before assembling them for use.

Technical Information

Product Name	Mini Wearable Breast Pump
Model Number	YY-A46
Power Input	AC100-240V, 50-60HZ, 0.2A
Power Output	5V-1A
Rated Power	3.5W
Battery Capacity	3.7V/1000mAh
Executive Standard	GB 4806.7-2016,GB 4806.2-2015,GB 4806.11-2016



保 修 卡

保修说明

一、保修范围：

在保修期内使用本产品过程中如发生以下问题，本公司予以免费保修：

- 1、由于产品本身存在质量问题，如开箱发现外观破损等；
- 2、由于在正常使用过程中产品本身的质量问题。

二、保修期限：

本产品保修期限为一年，自购买之日起计算（若购货发票遗失保修期自出厂之日起计算）。

三、超过保修范围服务：

在保修期内由于以下原因导致产品发生故障，本公司予以维修，但需收取材料费：

- 1、不按使用说明而发生的一切人为损坏；
- 2、用户擅自维修或改装本产品。

四、超过保修期服务：

超过保修期使用本产品发生故障，本公司予以维修，但需收取维修费和材料费。

用户资料

用户姓名

联系电话

购买日期

联系地址

维修记录

10

Warranty

1. Warranty scope:

If the following problems occur in the use of this product during the warranty period, the company will provide a free warranty:

1. Due to the quality problems of the product itself, such as appearance damage found out of the box, etc.
2. Due to the quality problems of the product itself in the course of normal use.

2. Warranty period:

The product warranty period is one year from the date of purchase (If the purchase invoice is lost, the warranty period time from the date of departure.)

3. Expired warranty scope service:

If the product breaks down during the warranty period due to the following reasons, our company will repair it, but we need to charge a material fee:

1. All man-made damage that occurs not in accordance with the instructions.
2. The user repairs or modifies this product without authorization.

4. Expired warranty period service:

If the product breaks down after the warranty period, we will repair it and charge the maintenance and material fee.

User Information

Name:

Telephone:

Date of Purchase:

Address:

Maintenance Record:



广州市永镓实业有限公司

GuanZhou Yongyi industrial Co.,Ltd

地址：广州市南沙区东涌镇马俊街4号101室102室103室

全国服务热线：400-666-8841 020-39953345

为了不断提升用户满意度，产品将持续升级，资料可能与实际产品有所差异，请以实物为准。

GUANGZHOU YONGYI INDUSTRIAL CO., LTD

Add: No.4, Majun Rd., Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China.

National Service Hotline: 400-666-8841 020-39953345

In order to continuously improve user satisfaction, the product will continue to upgrade, the information may be different from the actual product, please take the physical object as standard.

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.