



完整示意

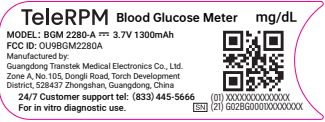


红色部分产线打印

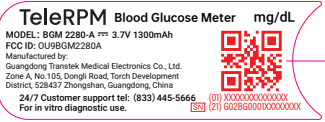

暗码尺寸：8*8mm

出纸方向预留大于500mm的空白贴纸
做设备调试用

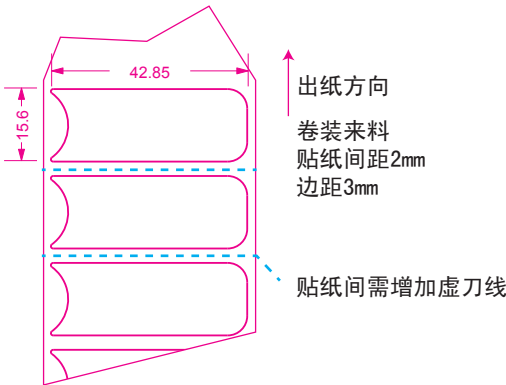


- ①二维码：类型GS1-Datamatrix，具体规则如下
(01)：UDI信息，固定量，14位；因未完成FDA认证，内容为(01)XXXXXXXXXXXXXX
(21)：仪器序列号，变量，16位；编码规则同SN

②血糖仪SN编码规则（共16位）V1.4

第1位 第2-3位 第4-7位 第8位 第9位 第10位 第11位 第12-16位
[SN] G 02 BG00 1 X X X XXXXX

- 第12-16位订单流水号, 5位数字（00001-99999）
- 第11位，生产日期位，如，1-9日用1-9，10日用A，11日用B，12日用C，如此类推；
- 第10位，生产月份位，如，1-9月用1-9，10月用A，11月用B，12月用C，如此类推；
- 第10位，第9位，生产年份位，如，2023年，写最后一位3；生产月份位，如，0-9月用0-9，10月用A，11月用B，12月用C，如此类推；
- 第8位：单位及版本配置位（0-9）：
0：中国版：公制单位（血糖：mmol/L；血酮：mmol/L；尿酸：μmol/L），语言（出厂默认为中文）；
1：北美版：美制单位（血糖：mg/dL；血酮：mmol/L；尿酸：mg/dL），语言（出厂默认为英文）；
2：欧洲版：公制单位（血糖：mmol/L；血酮：mmol/L；尿酸：μmol/L），语言（出厂默认为英文）；
3-9：待定义；
本机型为 1，北美版
- 第4-7位：产品类别代码位（只有2位时，6-7位为0；只有3位时，第7位为0）：
0、单血糖用BG（BG00为Blood Glucose血糖的简写）；
1、单尿酸用UA（UA00为Uric Acid尿酸的简写）；
2、单血酮用BK（BK00为Blood ketone血酮的简写）；
3、单胆固醇CL（CL00为Cholesterol胆固醇的简写）；
4、血糖+尿酸二合一用GU00（血糖Blood Glucose简写G，尿酸Uric Acid简写U）；
5、血糖+血酮二合一用GK00为（血糖Blood Glucose简写G，血酮Blood ketone简写K）；
6、血糖+胆固醇二合一用GC00为（血糖Blood Glucose简写G，胆固醇Cholesterol简写C）；
7、血酮+尿酸二合一用KU00（血酮Blood ketone简写K，尿酸Uric Acid简写U）；
8、血糖+血酮+尿酸为三合一用GKU0（血糖Blood Glucose简写G，血酮Blood ketone简写K，尿酸Uric Acid简写U）；
9、血糖+血酮+尿酸+胆固醇为四合一用GKUC（血糖Blood Glucose简写G，血酮Blood ketone简写K，尿酸Uric Acid简写U，胆固醇Cholesterol简写C）；
本机型为 BG00
- 第2-3位：产品流水位（01-99），例如，第一款用01，第二款用02...；**本机型为 02**
- 第1位，通讯类别位（A-Z）：A为普通款；B为蓝牙款；G为4G款；W为WiFi；**本机型为 G**

粘贴位置

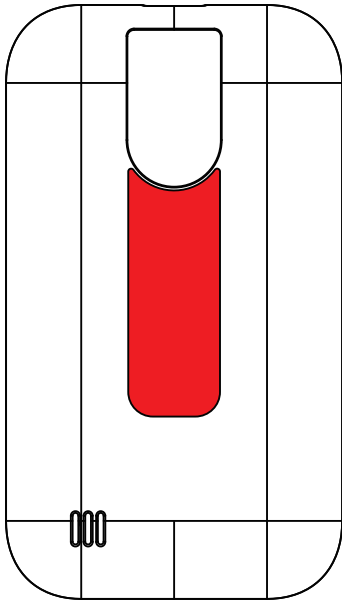

技术要求：

- 1、黏合不可露胶；
- 2、保持印刷面板上的清洁；
- 3、注意套印的准确性；
- 4、表面处理不可爆开；
- 5、所用材料及工艺须满足RoHS、Reach的环保要求；
- 6、结构工艺以结构受控图为准；
- 7、通用要求：成型后制品以《不干胶类来料检验标准》验收；
- 8、测试要求：保证产品在60℃，48小时的恒温测试下不起边、脱胶、气泡，印刷内容必须通过蒸馏水、酒精、异丙醇测试后能识别读出；
- 9、颜色参考：

产 品 型 号	TBG-2280A		材 质	80g铜版纸不干胶	零件名称 TBG-2280A-单血糖-GB-01-背贴-A0	
产 品 名 称	血糖仪		尺 寸	42.85*15.6 mm		
对应结构图纸	-		印 色	单黑		
	比 例	1:1	表面处理	可打印哑膜	零件图号 TBG-2280A-单血糖-GB-01	
	单 位	mm	设 计	郭健波 2024-04-12		
TRANSTEK 广东乐心医疗电子股份有限公司			审 核	徐紫燕 2024-04-12	共 1 张	第1张
			批 准	徐紫燕 2024-04-12	版 本	A/0