

GBY43-A 背贴


材质： 80g铜版纸不干胶

尺寸： 28.95*41.51mm，两贴纸间增加虚刀线

印色： 单黑

表面处理： 可打印哑膜

零件图号： GBY43-AA01-GB-03

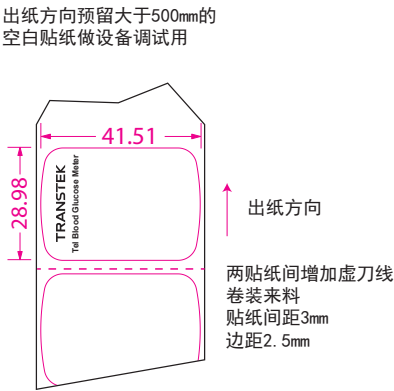

①二维码：类型GS1-Datamatrix，具体规则如下

(01)：UDI信息，固定量，14位；因未完成FDA认证，内容为(01)XXXXXXXXXXXX

(11)：生产批号，变量，6位；格式为(11)YYMMDD

其中YYMMDD代表年、月、日，如230427

血糖仪SN号规则

1) 背贴UDI中的变动信息（也即（21）后面的SN号）要与彩盒贴纸UDI（21）后面的SN号一一对应！ 2) 背贴上SN号要与彩盒贴纸上的SN号一一相对应！																								
流水号编码规则（下述涉及的数值只为了举例说明编码规则）： UDI的流水号标识符(21)后面的流水号是由12位数值构成，相关的编码规则如下： The serial numbers following the serial number identifier (21) of the UDI is consist of 12-bit datas. The code rules as below (p.s. The data below is just an example to explain the serial number code rules.)																								
SN规则	G		F		0		0		0		1		0		0		0		0		1			
SN位数	P1		P2		P3		P4		P5		P6		P7		P8		P9		P10		P11		P12	
备注	产品代码		F-FDA版，B-欧洲		P0流水号（P0订单后5位）								流水编号											
	1-血压计，2-称，G-血糖仪		MDD，M-欧洲MDR，T-国内		P0订单后5位								(00001-99999)											
举例	比如框中的“GF0000100001”血糖仪FDA版本第一个P0，第一台																							

实物要求符合Rohs、Reach、无卤、包装指令和环保标准

测试要求

测试项目	测试要求	验收标准
标签/贴纸酒精耐磨	用纯棉布(专用)蘸满无水酒精(浓度≥99.5%)，包在专用的测试头上(包上棉布后测试头的面积约为1cm²)，施加500g的载荷，用专业仪器或手工以40次/分钟~50次/分钟的速度，在样品表面来回擦拭。摩擦规定圈数：15圈。	印刷图文清晰，无断笔、缺划、模糊、掉油墨；允许图文有轻微的磨损及褪色，但要求内容仍完整且清晰可认，条码能扫描识别。
标签/贴纸橡皮耐磨	用专用的橡皮(橡皮型号：中华牌铅笔头部的圆形橡皮)，施加2kg f的载荷，以20~30次/分钟的速度，以20	

Label Location

